



Perfekt auf Pflege eingerichtet.

Komfort- und Pflegebetten für die Tages- und Heimpflege

.bock[®]///



Zuhören und verstehen

Wir haben Menschen in einer Pflegeeinrichtung nach ihren Wünschen und Bedürfnissen gefragt.

Pflegebetten

10

practico alu plus

Das Plus an Komfort, Funktion und Wohnlichkeit



20

practico 25|80

Das Niedrigbett mit maximalen Einstellmöglichkeiten



NEU:

practico 25|80 plus mit integrierter Seitensicherungsverlängerung und vielen weiteren Extras



14

practico alu 25|80

Einstieg in die Komfortklasse

26

livorno niedrig

Flexibles Basisbett mit attraktiven Details



Spezialbetten



32

floorline 9.5|80

Sicherheit für unruhige Schläfer



36

adilec 280

Leichtes Handling schwergewichtiger Bewohner

Neue Wohnformen



46

stellar

Pflege? Vielleicht später!



52

combiflex fc

Die clevere Kombination aus Komfort und Funktion

INHALT

VON MENSCHEN FÜR MENSCHEN

Die Zukunft der Pflege
gemeinsam gestalten 4

Starke Produkte für
starke Persönlichkeiten 6

UNSERE BETTEN

practico alu plus	10
practico alu 25 80	14
practico 25 80	20
livorno niedrig	26
floorline 9.5 80	32
adilec 280	36
stellar	46
combiflex fc	52

SMART CARE CONTROL

TEXIBLE Wisbi® HOME	42
TEXIBLE Wisbi® PLUS	43

EXTRAS

Seitensicherungen – Modelle	56
Bettverlängerungen	58
Zubehör Seitensicherungen	59
Zubehör	60
Endstücke	62
Holzarten & Stoffe	63
Matratzen	64
ripolux® neo	65
Nachttische und Server	66

SERVICE

Produkte in der Übersicht	70
Sicherheit und Qualität auf höchstem Niveau	72
Notizen	74

Die Zukunft der Pflege gemeinsam gestalten



Mehr denn je ist Pflege heute eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Eine der zentralen Fragen dabei lautet, wie knappe, personelle und zeitliche Ressourcen so eingesetzt werden können, dass pflegebedürftige Menschen ein hohes Maß an Wohlbefinden und Lebensqualität genießen können und gleichzeitig Pflegende entlastet werden – ob in Reha- und Pflegeeinrichtungen oder im familiären Umfeld.

Alles für einen besseren Pflegealltag

Unsere Aufgabe und unser Anspruch als Hersteller von Komfort- und Pflegebetten ist es, Antworten auf diese Frage zu geben – mit innovativen Produkten und durchdachten Prozessen, die Pflegekräfte sowie pflegende Angehörige bestmöglich unterstützen und ihren Alltag leichter, effektiver und effizienter machen. Damit sie ihre Ressourcen optimal einsetzen und den ihnen anvertrauten Personen mehr davon geben können, was wirklich zählt: Zeit und persönliche Zuwendung. Nicht zuletzt wollen wir auf diese Weise auch das wirtschaftliche Gelingen der Aufgabe „Pflege“ möglich machen.

Auf dem Weg zum digitalen Pflegebett

Um diese Ansprüche zu erfüllen, entwickeln und fertigen wir seit vielen Jahren hochwertige Gesundheits- und Pflegebetten, die Komfort und Sicherheit mit einfacher Handhabung, praxisgerechten Funktionen, Ergonomie und wohnlichem Design kombinieren. Dazu kommen zukunftsweisende Entwicklungen mit denen das Thema „Digitalisierte Pflege“ in eine neue Dimension vorstößt. Auch stilvolle, perfekt auf unser Bettenprogramm abgestimmte Möbel für die ganzheitliche Raumgestaltung gehören zu unserem Angebot.

100 Jahre Qualität und gute Ideen

In den vergangenen 100 Jahren hat bock sich zu einem der führenden Hersteller von Komfortbetten für Therapie und Pflege in Deutschland entwickelt. Darauf sind wir stolz – genau wie auf die Tatsache, dass unsere Produkte nach wie vor „Made in Germany“ sind und an unserem Unternehmenssitz im ostwestfälischen Verl gefertigt werden.

Wir freuen uns auf die kommenden Jahrzehnte und die vor uns liegenden Herausforderungen – und möchten Sie herzlich dazu einladen, gemeinsam mit uns erfolgreich die Zukunft der Pflege zu gestalten!

Starke Produkte für starke Persönlichkeiten



Sich in die Kissen kuscheln, entspannt die Augen schließen, die Welt um sich herum vergessen und dabei Sicherheit und Geborgenheit spüren: Das sind Erfahrungen, die wohl alle Menschen rund um den Globus miteinander verbinden – unabhängig von Alter, Kultur und Religion. Wir bei bock möchten, dass auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen sich in ihrem Bett rundum wohlfühlen – ganz gleich, ob sie kognitiv oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, vor Stürzen bewahrt werden müssen oder ein hohes Maß an Zuwendung benötigen.

Zuhören und verstehen

Um innovative Komfort- und Pflegebetten entwickeln und fertigen zu können, die all diese Ansprüche erfüllen, arbeiten wir eng mit Reha- und Pflegeeinrichtungen und renommierten wissenschaftlichen Experten zusammen.

Wir führen Gespräche mit Pflegenden und Angehörigen, um zu erfahren, worauf es den Menschen

ankommt, die unsere innovativen Produkte nutzen. Und nicht zuletzt sprechen wir mit den Menschen, für die unsere Betten ein wichtiger Teil ihres Lebens sind – denn oft genug wird in der gegenwärtigen Pflegediskussion weniger mit ihnen als über sie gesprochen.

Mehr Wissen für eine bessere Pflege

Gemeinsam mit dem Institut für Pflegewissenschaft der Paracelsus Medizinische Privatuniversität in Salzburg und seinem Leiter Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Osterbrink haben wir Menschen in einer Langzeitpflegeeinrichtung besucht und befragt. Sie haben uns erzählt, was sie von „ihrem“ Bett erwarten, damit es perfekt zu ihnen und ihrem Alltag passt.

Die Ergebnisse dieser Gespräche haben wir mit Gesundheitsdaten und pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen kombiniert – und hieraus eine Matrix typischer Alterspersönlichkeiten abgeleitet.

Diese kann als praxisgerechte Entscheidungshilfe herangezogen werden, wenn es um die Frage geht, welche Ausstattung des Lebens- und Pflegeumfeldes die richtige ist. Gleichzeitig haben wir in unseren Gesprächen wertvolle Erkenntnisse gewonnen, die uns dabei helfen, unsere Komfort- und Pflegebetten immer weiter zu verbessern.

Komfort- und Pflegebetten mit Profil

Einige der Menschen, die wir im Rahmen dieses Entwicklungsprojekts getroffen haben, möchten wir

Ihnen auf den folgenden Seiten vorstellen. Freuen Sie sich also darauf, in diesem Katalog nicht nur unsere Produkte kennenzulernen, sondern auch die Menschen, für die unsere Betten einen wichtigen Beitrag zu mehr Wohlbefinden und Lebensqualität leisten.

Gut möglich, dass Ihnen einige von ihnen bekannt vorkommen. Denn sympathische Persönlichkeiten wie sie trifft man in fast jeder Einrichtung und Familie – mit all ihren Wünschen, individuellen Eigenschaften und einzigartigen Biografien.

Klassifizierung typischer Alterspersönlichkeiten nach kognitiven und funktionalen Merkmalen.

	KOGNITIV NICHT/LEICHT BEEINTRÄCHTIGT (adäquate Auskunfts- und Entscheidungsfähigkeit)		KOGNITIV BEEINTRÄCHTIGT (keine adäquate Auskunft und Entscheidung möglich – Agitation, Orientierungsprobleme, Sundown-Phänomen etc.)	
KÖRPERLICH NICHT EINGESCHRÄNKT (selbstständig in Mobilität und Lebensführung)		Adelheid Inkontinenzgrad 1		Helmut Demenzgrad 1
KÖRPERLICH LEICHT EINGESCHRÄNKT (Muskuloskelettal Arme u./o. Beine, Ausscheidungen z. B. Inkontinenz, Nykturi)		Dorothee Inkontinenzgrad 2		Heike Demenzgrad 2 Inkontinenzgrad 2
KÖRPERLICH STARK EINGESCHRÄNKT (Muskuloskelettal neuronal z. B. Kontraktur, Hemiplegie, Spastizität)		Barbara Parkinsongrad 2 Inkontinenzgrad 3		Elisabeth Demenzgrad 2 Parkinsongrad 3 Inkontinenzgrad 2
IMMOBIL (Bettlägerig – Mobilität passives Bewegungstraining im Bett erforderlich)				Helga Demenzgrad 3 Parkinsongrad 3 Inkontinenzgrad 3



„ Mir passt mein Bett,
so wie es ist.“

Barbara, 89 Jahre

„Ich habe mich schon immer für Montessori-Pädagogik interessiert, höre gerne Musik und freue mich jedes Mal darauf, mit meiner Tochter oder Freunden im Park spazierenzugehen. Schlafen kann ich eigentlich immer gut, und mein Bett passt mir so, wie es ist – da brauche ich nichts zu verstellen.“



Während Barbara beim Zubettgehen nur leichte Hilfe braucht, muss sie bei der Alltagsbewältigung umfänglich unterstützt werden. Aufgrund ihrer Schlafstörungen und der Schwindelsymptomatik ist für sie ein Bett mit besonders niedriger Schlafposition ideal, gleichzeitig sollte das Bett zur Erleichterung der täglichen Pflegeabläufe gut verfahrbar sein und möglichst hoch positioniert werden können.

Barbaras Diagnose: 90%ige Seheinschränkung durch Makula-Degeneration, degenerative Veränderungen der Wirbelsäule und der Gelenke, Schwindel sowie Ein- und Durchschlafstörungen.

practico alu plus

Komfort auf ganzer Linie: Das beliebte Pflegebett mit vielen Pluspunkten



Das **practico alu plus** ist ein **vielseitiges Niedrigbett**, das man schon nach kurzer Zeit nicht mehr missen möchte: Das gilt für Pflegekräfte, die seine **Funktionalität und Ergonomie** zu schätzen wissen, aber auch für zufriedene Bewohner, die sich über sein wohnliches Design und den hohen Liegekomfort freuen. Dieser wird durch das 860 mm **lange Rückenteil** noch einmal erhöht, da es eine besonders ergonomische Oberkörperlagerung sowie eine **Reduzierung von Druckspitzen** ermöglicht.

Weitere klare Pluspunkte sind auch die **integrierte, werkzeuglose Bettverlängerung** sowie die **teleskopierbare Seitensicherung**, die sich ganz einfach auf 210 cm und 220 cm verlängern lässt – ohne zeitaufwendigen Austausch.

Details, die das practico alu plus für viele Pflegeprofis zur ersten Wahl machen, wenn es um eine flexible, zukunftsichere und hochwertige Ausstattung von Reha- oder Pflegeeinrichtungen geht.




Holger (32), Köln

„Die integrierte, werkzeuglose Bett- und Seitensicherungsverlängerung ist eine super Idee – da hat wirklich mal jemand mitgedacht. Und auch unsere Bewohner lieben ‚ihr‘ practico alu plus!“



Endstück Typ 22

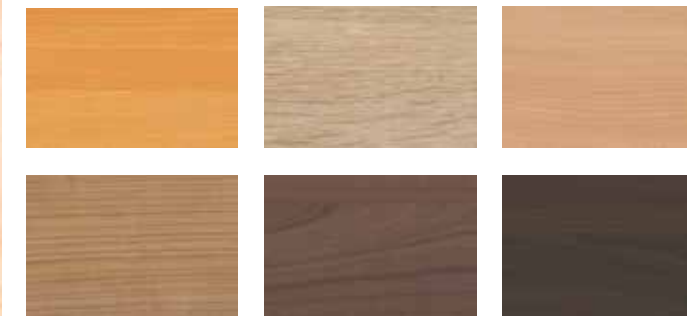

Details zu den Dekoren auf Seite 63

practico
alu plus

practico
alu plus



Kompatibel mit TEXIBLE Wisbi® Seite 42

Maße		
Außenmaß	102 x 208,5 cm	
Liegefläche	90 x 200 cm	
Sondermaße	Breite	100, 110 cm
	Länge integriert bis	210 cm 220 cm
Höhenverstellung	25 – 80 cm	
Lifterunterfahrbarkeit	15 cm	

Gewichte	
Bettgewicht	ca. 135 kg
Sichere Arbeitslast	220 kg
Max. Personengewicht	185 kg

Seitensicherung	
Material	Holz
Unterteilung	durchgehend lang geteilt kurz geteilt kopfseitig
Höhe*:	
– Mit Federholzleisten	39,5 cm
– Mit ripolux® neo	35 cm

Weitere Ausstattungsmerkmale	
Endstück-Typen	20, 21, 22
Motor Spritzwasserschutz nach IPX4, hochwertiges Spiralkabel mit Zugentlastung und Knickschutz, SMPS Steckertrafo mit Schutzkleinspannung und dadurch Sicherheit ab der Steckdose	
Optional: CPR-Notabsenkung	

*Abstand zwischen Oberkante Liegefläche und Oberkante hochgezogene Seitensicherung



Produktspezifikationen, Endstücke und Zubehör finden Sie ab Seite 56



Handscharter mit Lichttaste



Schwesterpanel



Zentralverriegelung mit Richtungsfeststeller



Handscharter und Extra-Handscharter für Beleuchtung



Aufstehhilfe



Werkzeuglos verlängerbare Seitensicherung




Mehr Informationen:



www.bock.net/x4x2

Die Produktvorteile des practico alu plus:

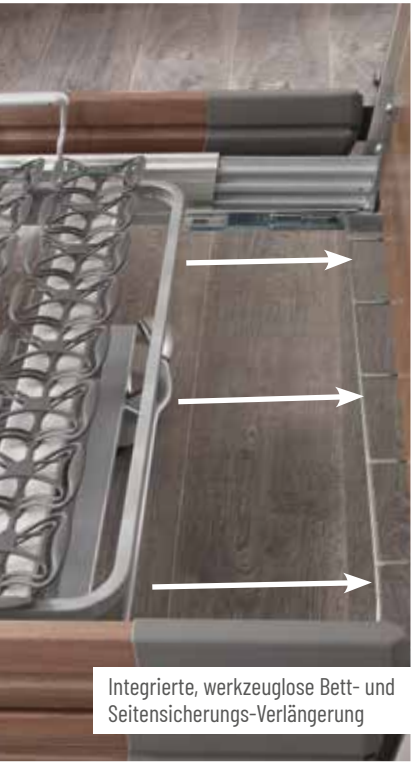


Integrierte, werkzeuglose Bett- und Seitensicherungs-Verlängerung



Einsatz Bettverlängerung

- ⊕ Höhenverstellbarkeit von 25 – 80 cm
- ⊕ Ergonomische Rückenlehne zur Unterstützung einer physiologischen Sitzposition
- ⊕ Einzelantriebe für hohe Zuverlässigkeit
- ⊕ Zentralverriegelung mit Richtungsfeststeller
- ⊕ Integrierte, werkzeuglose Bett- und Seitensicherungs-Verlängerung auf 210 cm und 220 cm
- ⊕ Diverse Komfort-Liegeflächen

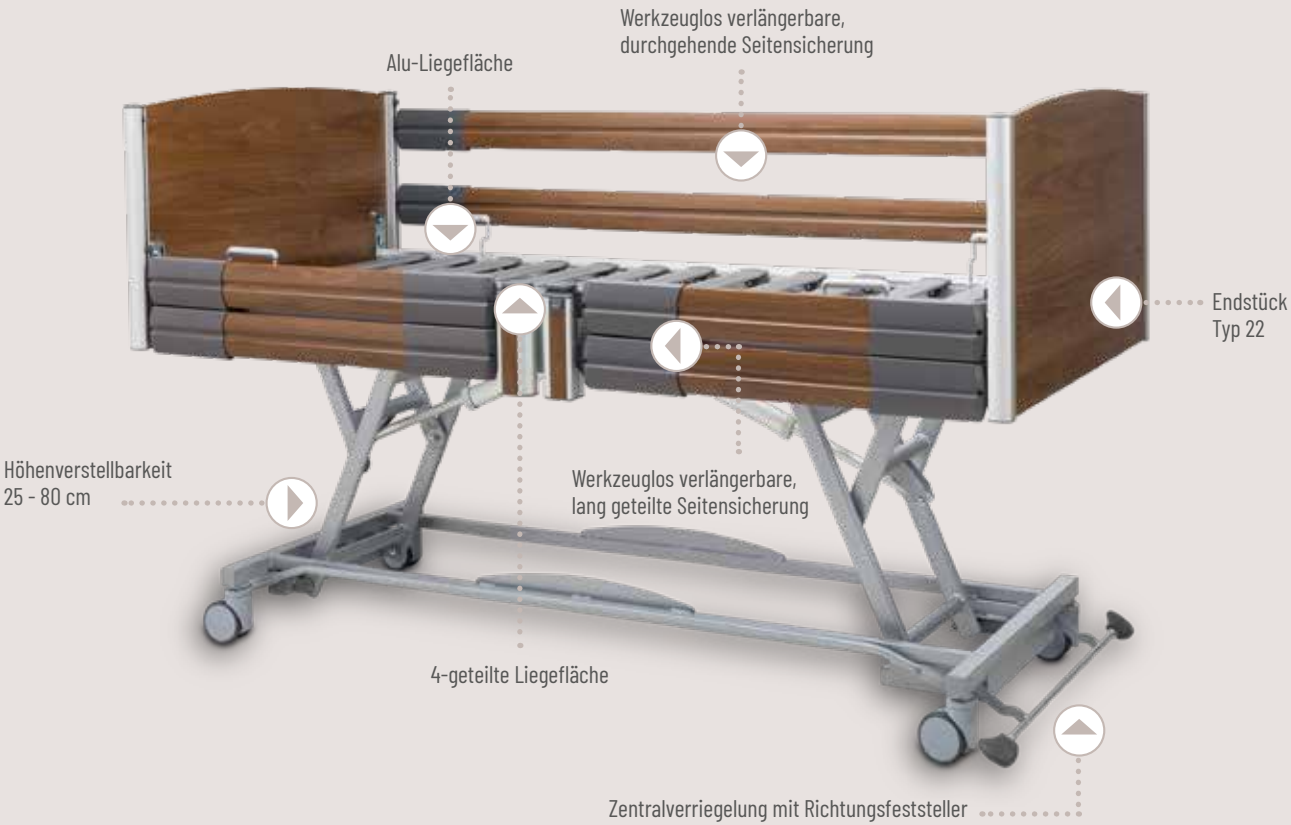

practico alu 25|80

Gehen Sie einfach in die Verlängerung: Unser Einstieg in die Komfortklasse




Das **practico alu 25|80** überzeugt mit einer überragenden Funktionsvielfalt, erstklassigem Liegekomfort sowie einem attraktiven Design – und eignet sich damit ideal als Standardbett für Reha- und Pflegeeinrichtungen. Auch in Sachen **Wirtschaftlichkeit** punktet das **practico alu 25|80** – und das nicht nur wegen seines besonders attraktiven Anschaffungspreises: Denn dank seiner hohen Qualität ist es ideal für den Dauereinsatz im Pflegealltag geeignet.

Wie sein „großer Bruder“, das **practico alu plus**, verfügt das **practico alu 25|80** über eine **integrierte, werkzeuglose Bettverlängerung** um 20 cm und erlaubt dadurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Pflegesituationen und Bewohnerprofile.



Beintieflagerung

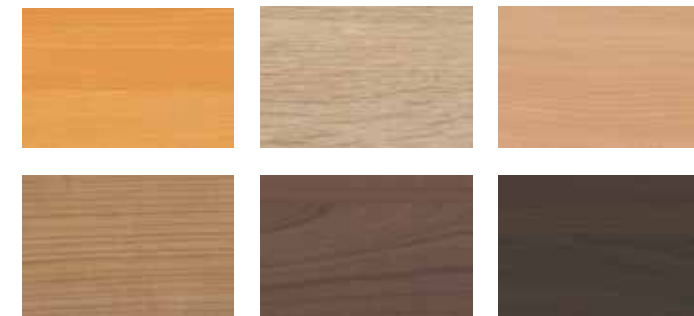

Details zu den Dekoren
auf Seite 63



Rita (48), Bremerhaven

„Ich schätze am practico alu 25|80 die große Höhenverstellbarkeit, da sie mir ein rückschonendes Arbeiten ermöglicht. Und unsere Bewohner freuen sich über die vielen Einstellmöglichkeiten.“

practico alu
25|80

practico alu
25|80



Kompatibel mit TEXIBLE Wisbi® Seite 42

Maße			
Außenmaß		102 x 208,5 cm	
Liegefläche		90 x 200 cm	
Sondermaße	Breite	100, 110 cm	
	Länge	210, 220 cm	
Höhenverstellung		25 - 80 cm	
Lifterunterfahrbarkeit		15 cm	

Gewichte	
Bettgewicht	160 kg
Sichere Arbeitslast	220 kg
Max. Personengewicht	185 kg

Seitensicherung	
Material	Holz
Unterteilung	durchgehend lang geteilt kurz geteilt kopfseitig
Höhe*:	
- Mit Federholzleisten	39,5 cm
- Mit ripolux® neo	35 cm

Weitere Ausstattungsmerkmale	
Endstücke	20, 21, 22
Motor Spritzwasserschutz nach IPX4, hochwertiges Spiralkabel mit Zugentlastung und Knickschutz, SMPS Steckertrafo mit Schutzkleinspannung und dadurch Sicherheit ab der Steckdose	

*Abstand zwischen Oberkante Liegefläche und Oberkante hochgezogene Seitensicherung



Produktspezifikationen, Endstücke und
Zubehör finden Sie ab Seite 56



Wandabweisrolle



Aluminium-Seitenblende



Verlängerbare, kopfseitige Seitensicherung



Bettleuchte Modell F



11-Tasten-Handschalter




Mehr Informationen:



www.bock.net/x19u

Die Produktvorteile des practico alu 25|80

- Integrierte, werkzeuglose Bett- und Seitensicherungs-Verlängerung auf 210 cm und 220 cm
- Moderne Liegefläche mit Alu-Funktionsblende
- Zentralverriegelung für alle vier Rollen
- Höhenverstellbarkeit von 25 - 80 cm
- Lifterunterfahrbarkeit 15 cm

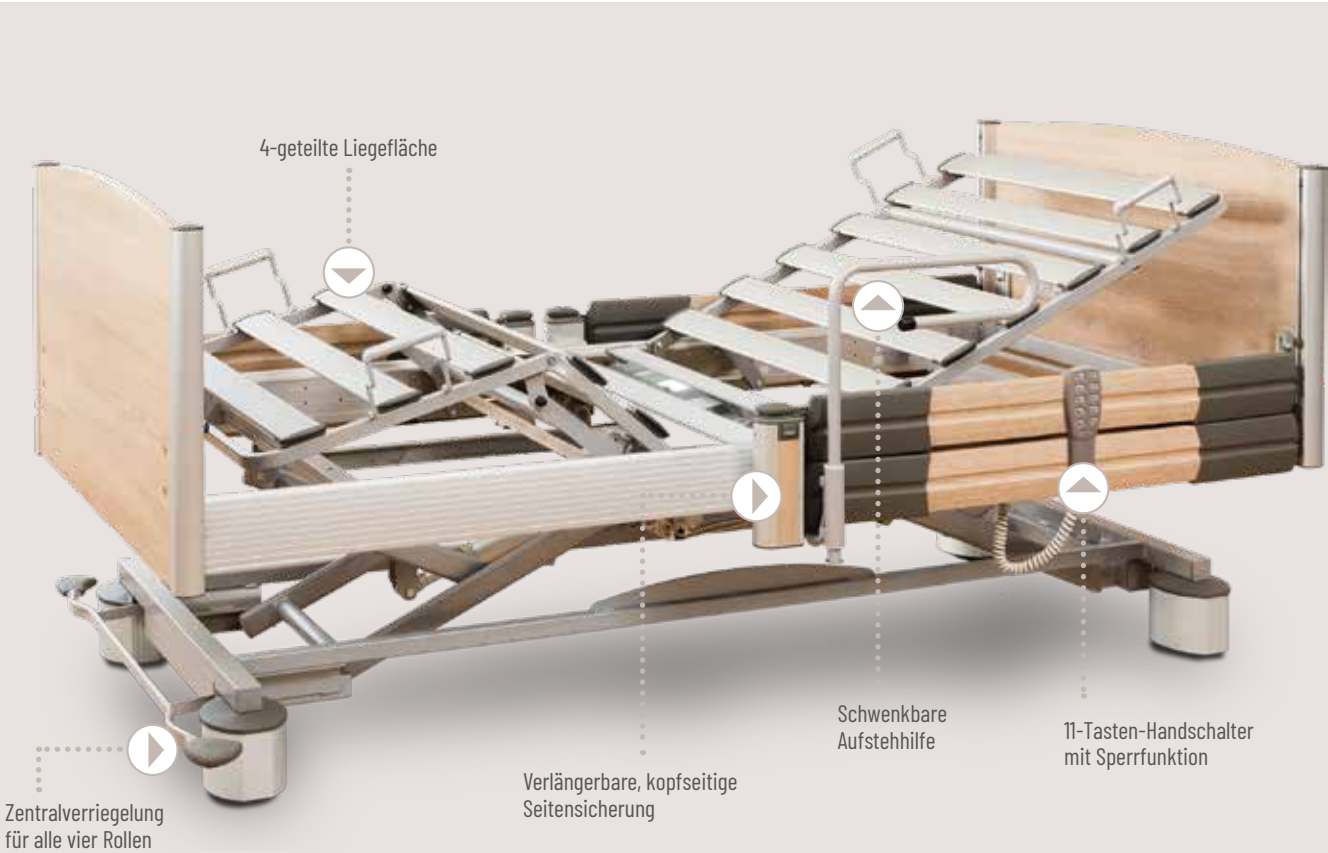




„ Ich will geistig fit bleiben.

Dorothee, 92 Jahre

„Ich will geistig fit bleiben. Deshalb lese ich viel, rätsele für mein Leben gern und beteilige mich am sozialen Leben in der Einrichtung. Früher habe ich selber Seniorenclubs geleitet. Mit den Leuten plaudern und auch mal einen Tee trinken, das tue ich gerne!“

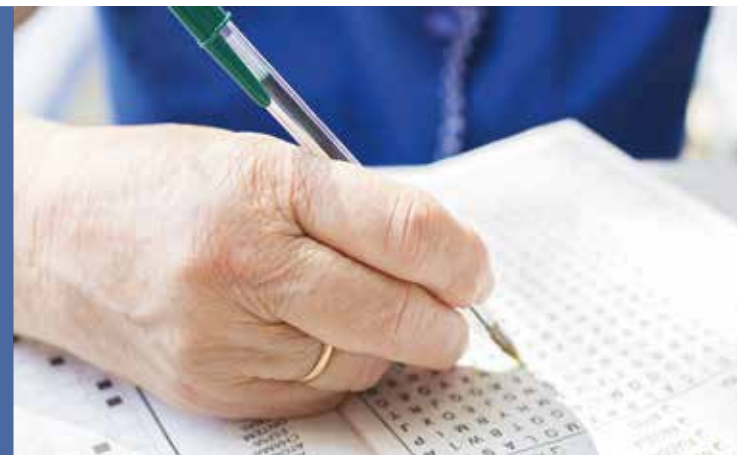

Dorothee schläft nachts fast immer durch. Deshalb wäre ein Monitoringsystem mit Meldefunktion ideal für sie, da nächtliche Störungen vermieden werden können. Ihr Bett sollte dazu beitragen, ihre Mobilität und Selbstständigkeit zu erhalten – beispielsweise durch eine gute Ausstiegposition und Endstücke mit Handlauf.

Dorothees Diagnose: Osteoporose und Niereninsuffizienz. Ihre Krankheiten haben keine wesentlichen Auswirkungen auf ihre Selbstständigkeit, sodass sie keinerlei Unterstützung bei der Alltagsbewältigung braucht.

practico 25|80

Alles andere als 08/15 ...



Praxisgerechte Funktionen, eine besonders **großzügige Höhenverstellbarkeit, Komfort und Sicherheit** sowie ein ansprechendes Design, das zu vielen Wohnumgebungen passt: Auch dem **practico 25|80** sieht man auf den ersten Blick an, dass es ein echtes „bock“ ist – ein **rundum ausgereiftes Pflegebett**, in dem viele Jahrzehnte Erfahrung stecken und das inspiriert wurde von den Menschen, die Tag für Tag in der Pflege arbeiten. Neben der **integrierbaren Bettverlängerung** (Seitensicherungstausch erforderlich)

verfügt es über viele weitere sinnvolle Ausstattungsdetails, wie **Zentralverriegelung, Kopf- und Beintiefelagerung oder die Komfort-Sitzposition**.

Darüber hinaus kann das practico 25|80 mit attraktiven Extras ausgestattet werden, von der edlen Alu-Fußverkleidung über eine Unterbettbeleuchtung bis hin zu unterschiedlichen Wandabstandhaltern. Das practico 25|80 ist wahlweise auch in der Alu-Ausführung mit integrierter, werkzeugloser Bett- und Seitensicherungsverlängerung erhältlich.




Details zu den Dekoren auf Seite 63



Eileen (42), Bad Lippspringe

„Alles drin, alles dran: Das practico 25|80 hat alles, was ein Pflegebett braucht – und ist außerdem super komfortabel.“

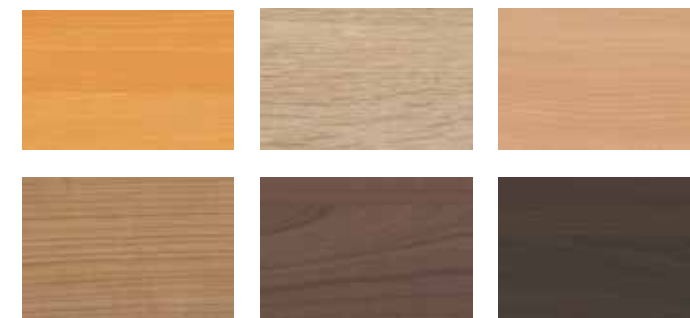

practico
25|80

practico
25|80



Kompatibel mit TEXIBLE Wisbi® Seite 42

Maße			
Außenmaß		105 x 210 cm	
Liegefläche		90 x 200 cm	
Sondermaße	Breite	100, 110 cm	
	Länge	210, 220 cm	
Höhenverstellung		25 - 80 cm	
Lifterunterfahrbarkeit		15 cm	

Gewichte	
Bettgewicht	147 kg
Sichere Arbeitslast	220 kg
Max. Personengewicht	185 kg

Seitensicherung	
Material	Holz
Unterteilung	durchgehend lang geteilt kurz geteilt kopfseitig
Höhe*:	
- Mit Federholzleisten	39,5 cm
- Mit ripolux® neo	35 cm

Weitere Ausstattungsmerkmale	
Endstücke	I, IV, V, VII, VIII
Motor Spritzwasserschutz nach IPX4, hochwertiges Spiralkabel mit Zugentlastung und Knickschutz, SMPS Steckertrafo mit Schutzkleinspannung und dadurch Sicherheit ab der Steckdose	

*Abstand zwischen Oberkante Liegefläche und Oberkante hochgezogene Seitensicherung



Produktspezifikationen, Endstücke und
Zubehör finden Sie ab Seite 56



Höhenverstellung auf optimale
Pflegehöhe von 80 cm



Lang geteilte Seitensicherung



Zentralverriegelung für alle vier Rollen
optional auch mit Alu-Rollenverkleidung



Handschalter mit Tasten für Komfort-
sitzposition und Bettbeleuchtung



Mehr Informationen:



www.bock.net/x37k

Jetzt auch mit
integrierter
Seitensicherung und
vielen weiteren
Extras: das neue
practico 25|80 plus

bock.net/y17f



Die Produktvorteile des practico 25|80:

- ⊕ Höhenverstellbarkeit von 25 - 80 cm
- ⊕ Zentralverriegelung mit Richtungsfeststeller
- ⊕ Lifterunterfahrbarkeit 15 cm
- ⊕ Komfort-Sitzposition
- ⊕ Verschiedene Seitensicherungsvarianten zur Auswahl
- ⊕ Integrierbare Bettverlängerung





„ Ich will möglichst
lange mobil bleiben.“

Gerda, 91 Jahre

„Bis vor kurzem habe ich noch Haus und Garten selbst versorgt. Jetzt trainiere ich fast täglich im Fitnessraum, denn ich will so lange wie möglich mobil bleiben. Gut schlafen bedeutet für mich, entspannt aufzuwachen. Und auf meinen Mittagsschlaf freue ich mich mehr als auf das Mittagessen!“




Wenn es um ihr Bett geht, steht Komfort für Gerda im Vordergrund. Bis auf die elektrischen Verstellmöglichkeiten, mit der sie selbstständig die Höhe von Bett und Kopfteil verändert, braucht sie keine weiteren Bettfunktionen. Auch eine besondere Bett-ausstattung ist für sie nicht nötig.

Gerdas Diagnose: Osteoporose, länger zurückliegende Hüft-OP, Herz- und Nieren-Insuffizienz. Trotz ihrer Krankheiten ist Gerda völlig selbstständig und benötigt im Alltag keinerlei Unterstützung.

livorno niedrig

Die Basis für ein rundum gutes Wohngefühl

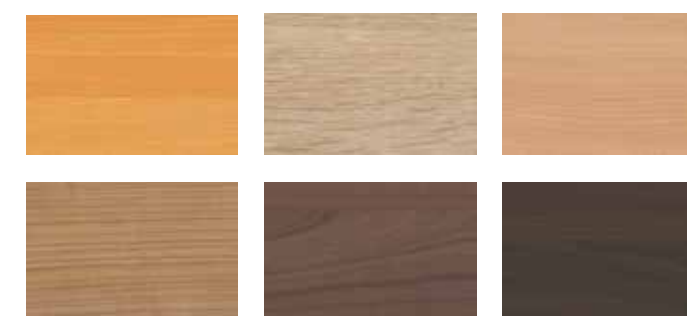

Zahlreiche Ausstattungsvarianten sowie eine große Auswahl an Dekoren und Endstücken machen das **livorno niedrig** zum **flexiblen Pflegebett** für Reha- und Pflegeeinrichtungen. Neben seinem eleganten Design punktet es mit praxisgerechten Funktionen und hoher Alltagstauglichkeit.

Und auch **wirtschaftlich** macht das livorno niedrig eine gute Figur – und das gleich in mehrfacher

Hinsicht: Denn neben einem attraktiven PreisLeistungsverhältnis trägt es durch praxisgerechte Funktionen zu einer nachhaltigen Entlastung im Pflegealltag bei.

Nicht zuletzt sorgen die **robuste Konstruktion und langlebige Materialien** dafür, dass das livorno niedrig eine Investition ist, die sich rechnet.



Mona (35), Passau

„Das livorno niedrig ist ein echter Allrounder, denn es lässt sich optimal auf jeden Bewohner einstellen und bietet alle Funktionen, die man im Alltag braucht.“

Details zu den Dekoren auf Seite 63

livorno
niedrig

livorno
niedrig

livorno
niedrig



Kompatibel mit TEXIBLE Wisbi® Seite 42

Maße			
Außenmaß		105 x 212 cm	
Liegefläche		90 x 200 cm	
Sondermaße	Breite	100, 110 cm	
	Länge	190, 210, 220 cm	
Höhenverstellung		29 - 73 cm	
Lifterunterfahrbarkeit		15 cm	

Gewichte	
Bettgewicht	ca. 109 kg
Sichere Arbeitslast	200 kg
Max. Personengewicht	165 kg

Seitensicherung	
Material	Holz
Unterteilung	durchgehend lang geteilt kurz geteilt kopfseitig
Höhe*:	
- Mit Federholzleisten	39,5 cm
- Mit ripolux® neo	35 cm

Weitere Ausstattungsmerkmale	
Endstücke	I, IV, V, VII, VIII
Motor Spritzwasserschutz nach IPX4, hochwertiges Spiralkabel mit Zugentlastung und Knickschutz, SMPS Steckertrafo mit Schutzkleinspannung und dadurch Sicherheit ab der Steckdose	
Optional: Höhenverstellbarkeit von 37-81 cm	

*Abstand zwischen Oberkante Liegefläche und Oberkante hochgezogene Seitensicherung



Produktspezifikationen, Endstücke und
Zubehör finden Sie ab Seite 56



Handschalter mit Sperrfunktion
und Bettbeleuchtung



Zentralverriegelung optional mit Rollenverkleidung



Mobilisierungsunterstützende Seitensicherung

Die Produktvorteile des livorno niedrig:



Endstück Typ I


- + Zentralverriegelung
- + Lifterunterfahrbarkeit
- + Niedrige Betteinstiegshöhe 29 cm
- + Handschalter mit Sperrfunktionen
- + Diverse Komfort-Liegeflächen
- + Verschiedene Seitensicherungsoptionen



Mehr Informationen:



www.bock.net/x39a

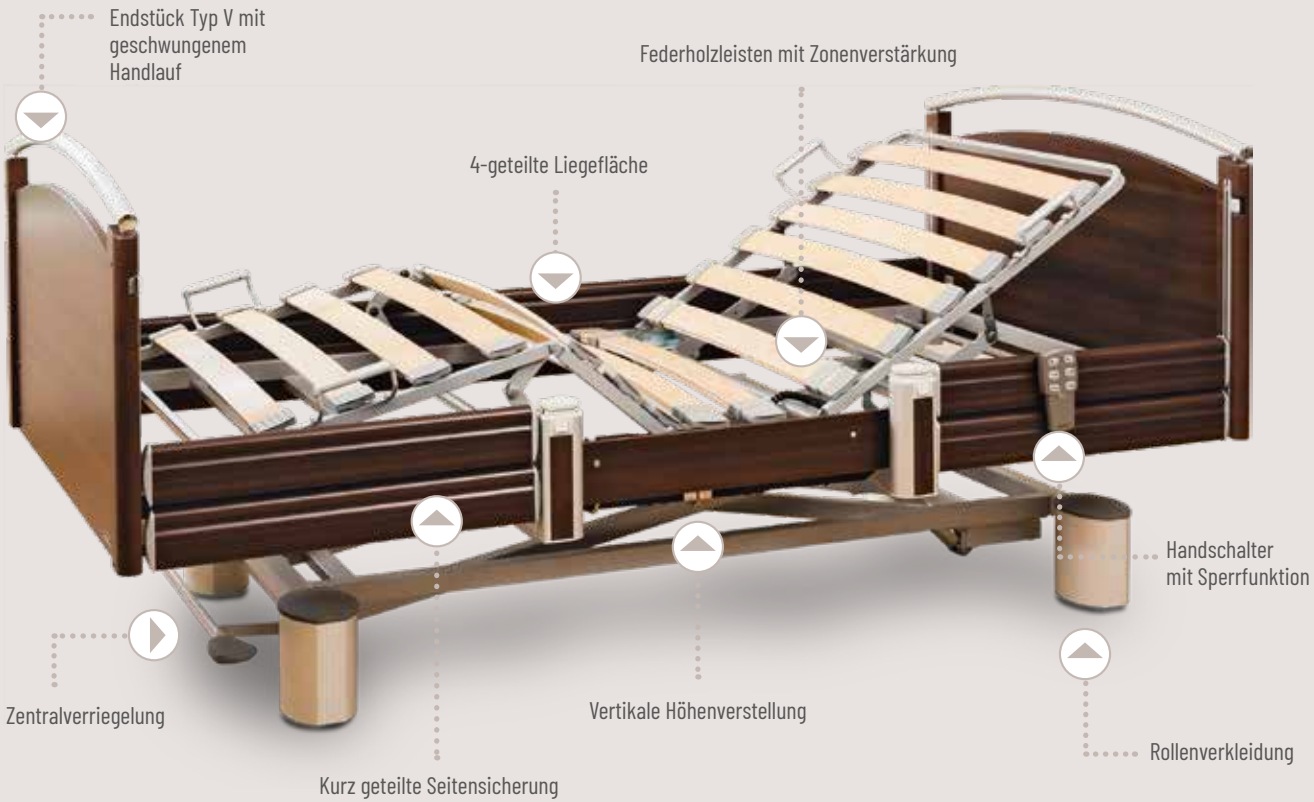



Selbstständig sein,
das ist das Wichtigste.

”

Elisabeth, 101 Jahre

„Ich mag gerne schlafen und spazierengehen, liebe Schokolade und lese die Zeitung. Gut zu schlafen bedeutet für mich ‚Leben‘. Deshalb schlafe ich auch mittags bis zu zwei Stunden – in meiner Kleidung und ohne Schuh, da liege ich und stecke meinen Kopf hinein in die Kissen!“



Während Elisabeth im Alltag teilweise Unterstützung braucht, meistert sie den Bettein- und ausstieg selbstständig. Ihr Pflegebett sollte dies idealerweise fördern, z. B. durch flexible Seitensicherungen und Endstücke mit Handlauf. Wegen ihrer nächtlichen Ängste wäre zudem eine möglichst tiefe Lagerung zur Sturzfolgenprophylaxe wünschenswert.

Elisabeths Diagnose: Mittelschwere Demenz vom Alzheimer-Typ, Zustand nach Schlaganfall, in der Nacht häufig auftretende Halluzinationen; Vorhofflimmern sowie altersbedingte, linksseitige Schwerhörigkeit.

floorline 9.5|80

Für einen *tiefen* und sicheren Schlaf: Unser Niedrigstbett mit höchstem Komfort




Der Superlativ im Segment der Niedrigstbetten: Das **floorline 9.5|80** ermöglicht ein bodennahes, angstfreies Liegen und schützt unruhige Schläfer vor sturzbedingten Verletzungen – im Einklang mit dem Werdenfelser Weg **ohne freiheitsentziehende oder fixierende Maßnahmen**. Es lässt sich so tief absenken, dass der Bewohner im Falle eines Falles **gefahrlos aus dem Bett gleitet** und nicht fällt. So kann auf das zeitraubende Auslegen von Abrollmatten verzichtet werden, die zudem die selbstbestimmte Mobilität einschränken können.

Durch die **barrierefreie Niedrigposition** ist es zudem auch für viele eingeschränkt mobile Menschen möglich, im „Vierfüßlerstand“ selbstständig ins Bett zurückzukehren.

Dank der maximal einstellbaren Höhe von 80 cm genießt auch Ihr Pflegepersonal komfortable Arbeitsbedingungen.

Ein weiterer Vorteil des floorline 9.5|80 ist die **spezielle Hubsäulenmechanik am Kopf- und Fußteil**. Hierdurch ist unser Niedrigstbett **komplett unterfahrbar** und leicht zu reinigen.

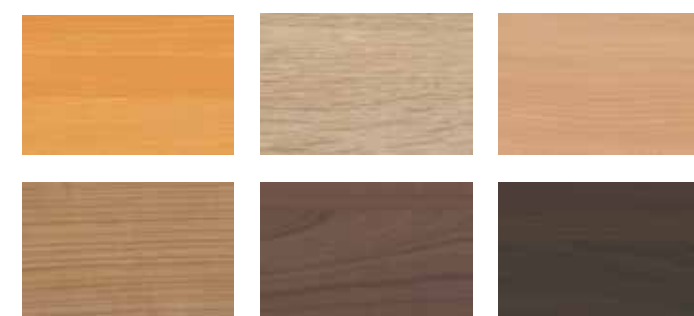

Details zu den Dekoren
auf Seite 63



Igor (28), Hamburg

„In diesem Bett fühlen sich ängstliche oder sturzgefährdete Bewohner einfach sicher.“

floorline
9.5|80

floorline
9.5|80





Kompatibel mit TEXIBLE Wisbi® Seite 42

Maße	
Außenmaß	102 x 240 cm
Liegefläche	90 x 200 cm
Bettverlängerung bis	220 cm
Höhenverstellung	9,5 - 80 cm
Lifterunterfahrbarkeit	> 15 cm

Gewichte	
Bettgewicht	ca. 165 kg
Sichere Arbeitslast	220 kg
Max. Personengewicht	185 kg

Seitensicherung	
Material	Holz
Unterteilung	durchgehend lang geteilt kurz geteilt kopfseitig
Höhe*:	
- Mit Federholzleisten	39,5 cm
- Mit ripolux® neo	35 cm

Weitere Ausstattungsmerkmale	
Endstücke	31, 32
Motor	
Spritzwasserschutz nach IPX4, hochwertiges Spiralkabel mit Zugentlastung und Knickschutz, SMPS Steckertrafo mit Schutzkleinspannung* und dadurch Sicherheit ab der Steckdose	
*Ab Juli 2019	

*Abstand zwischen Oberkante Liegefläche und Oberkante hochgezogene Seitensicherung



Produktspezifikationen, Endstücke und
Zubehör finden Sie ab Seite 56



Die integrierte Bettverlängerung ermöglicht eine druckfreie Lagerung der Füße



Mobilisierung durch
Endstück 31 mit Handlauf



Große Stabilität in jeder
Höhe durch die Hubsäule



Matratzenausgleich mit zusätzlicher Aluleiste
verhindert das Durchrutschen der Matratze



Handschalter



Mehr Informationen:



www.bock.net/x67u


Die Produktvorteile des floorline 9.5|80:



- 80 cm: Maximalhöhe/Arbeitshöhe
- 37,5 cm: Einstiegs-/Ausstiegsposition
- 27,5 cm: Sicherheitsstopp
- 15,5 cm: Sicherheitsstopp für geteilte Seitensicherung (Zubehör)
- 9,5 cm: Bodennahe Position

5-Stopp-Funktion

- + Niedrigbett mit besonders bodennaher Schlafposition: komfortabel, selbstbestimmt und sicher
- + Verlässliche Sturzfolgenprophylaxe
- + Gleiten statt Fallen: Sicherheit ohne Fixierung auch für unruhige Schläfer
- + Enorme Höhenverstellung von 9,5 - 80 cm
- + Besonderer Bewohner- und Pflegekomfort durch Kopftief-/Beintief-Lagerung
- + Integrierte, werkzeuglose Bettverlängerung auf 210 cm und 220 cm
- + Serienmäßige Unterbettbeleuchtung für mehr Sicherheit in der Nacht

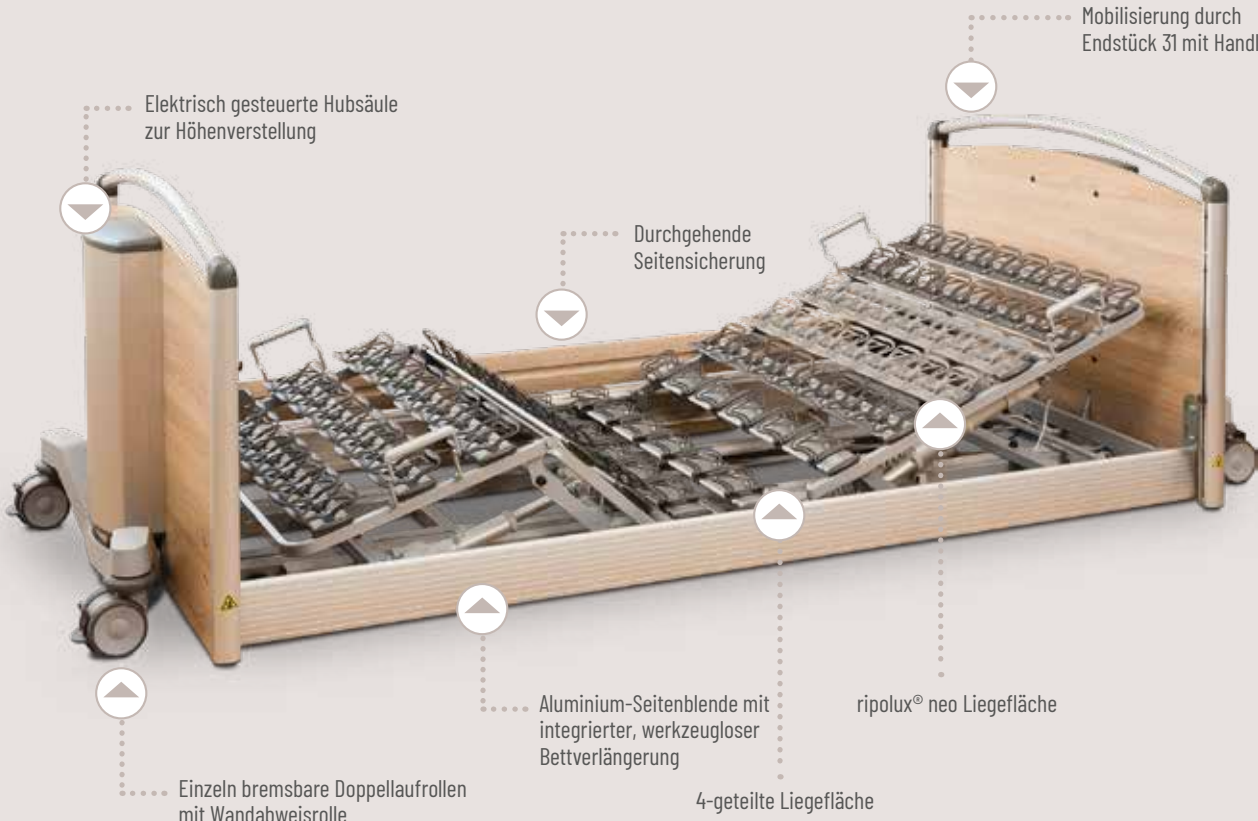

Elektrisch gesteuerte Hubsäule zur Höhenverstellung

Durchgehende Seitensicherung

Mobilisierung durch Endstück 31 mit Handlauf

Einzeln bremsbare Doppellaufrollen mit Wandabweisrolle

Aluminium-Seitenblende mit integrierter, werkzeugloser Bettverlängerung

ripolux® neo Liegefläche

4-geteilte Liegefläche

adilec 280

Einfach stark: Leichtes Handling auch bei schwerer Belastung



Die Lagerung und Pflege schwergewichtiger Menschen stellt hohe Ansprüche an professionell Pflegende – und ist in der Regel auch für den Pflegebedürftigen selbst mit besonderen Herausforderungen verbunden.

Mit unserem **hoch belastbaren Pflegebett adilec 280** bieten wir Ihnen eine robuste Lösung für adipöse Menschen **bis zu 280 kg Patientengewicht** an, die Komfort und Sicherheit mit höchster Funktionalität verbindet. Dank leistungsfähiger Motoren lässt sich die Liegefläche problemlos anpassen, eine **spezielle**



Gudrun (51), Aachen

„Das adilec 280 ist extrem robust und hat bisher noch bei keinem unserer schweren Bewohner ‚schlapp gemacht‘. Dabei lässt es sich so einfach verstellen wie jedes andere unserer Betten.“



Hubsäulenmechanik ermöglicht eine **schnelle und unkomplizierte Höhenverstellung** von 40 - 80 cm. Für Sicherheit auch bei hoher Lagerung sorgen verwundungsfreie und besonders stabile Seitensicherungsholme. Eine **sichere Arbeitslast von enormen 315 kg** sorgt zudem dafür, dass Sie mit dem adilec 280 für annähernd jede Pflegesituation bestens gerüstet sind. Starke Argumente also für unser stärkstes Bett!

adilec
280

adilec
280



Kompatibel mit TEXIBLE Wisbi® Seite 42

Maße			
Außenmaß		116 x 223 cm	
Liegefläche		100 x 200 cm	
Sondermaße	Breite	120, 140 cm	
	Länge	220 cm	
Höhenverstellung		40 - 80 cm	
Lifterunterfahrbarkeit		> 15 cm	

Gewichte	
Bettgewicht	210 kg
Sichere Arbeitslast	315 kg
Max. Personengewicht	280 kg

Seitensicherung	
Material	Holz
Unterteilung	durchgehend
Höhe*	39 cm

Weitere Ausstattungsmerkmale	
Motor	Spritzwasserschutz nach IPX4, hochwertiges Spiralkabel mit Zugentlastung und Knickschutz sowie Sicherung im Netzstecker, Netzfreischaltung

*Abstand zwischen Oberkante Liegefläche und Oberkante hochgezogene Seitensicherung



Produktspezifikationen und Zubehör finden Sie ab Seite 56



Handschalter



Kopf- und fußseitige Feststellbremse



Leseleuchte Typ E



Mehr Informationen:



www.bock.net/xa34

Die Produktvorteile des adilec 280:



Atmungsaktive Holzliegefläche

- + Robuste Hubmechanik
- + Sichere Arbeitslast 315 kg
- + Für Bewohner mit bis zu 280 kg Körpergewicht
- + Liegeflächen-Breiten in drei Größen 100, 120 und 140 cm wählbar
- + Höhenverstellbarkeit von 40 – 80 cm
- + 4-geteilte Liegefläche
- + Integrierte Holzseitensicherung





„ Ich möchte nicht
mein ganzes Leben verschlafen!

Heike, 89 Jahre

„Ich mache am liebsten Spaziergänge im Park und setze mich dort auf ein ruhiges Bänkchen. Alle 14 Tage gehe ich im Fitnessraum sporteln. Früher hatte ich einen großen Garten, den ich schon sehr vermisse. Die Stunden, die ich schlafe, schlafe ich gut – aber ich möchte ja nicht mein ganzes Leben verschlafen!“



Heike nutzt ihr Bett nicht nur zum Schlafen, sondern sieht abends auch gern lange fern. Sie selbst kann das Bett allerdings nicht so einstellen, wie sie es gern hätte, eine einfachere Bedienung wäre wünschenswert. Ansonsten sollte ihr Bett ihre Mobilität optimal unterstützen und nächtliche Sicherheit bieten.


Heikes Diagnose: Osteoporose, Hypertonie und steigende Frailty (frailty index: 0,6). Heike ist kognitiv mittelmäßig beeinträchtigt und leidet unter Schlafstörungen, braucht im Alltag jedoch keine Unterstützung.

TEXIBLE Wisbi® HOME

Unterstützung im Pflegealltag: Via App jederzeit informiert!

TEXIBLE Wisbi® HOME – für pflegende Angehörige

Die SMART Care Sensormatte TEXIBLE Wisbi® HOME ist eine intelligente Bettelinlage mit Sensortechnik, die Pflegekräfte oder pflegende Angehörige sofort alarmiert, wenn ein Bewohner das Bett verlässt oder auf einer feuchten Unterlage liegt. Auf diese Weise kann Wisbi® dazu beitragen, sturzbedingte Verletzungen und feuchtigkeitsbedingte Erkrankungen vorzubeugen.

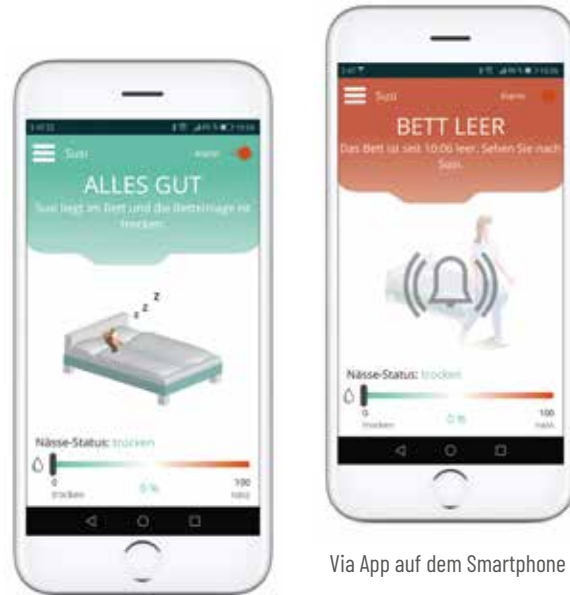

Via App auf dem Smartphone

TEXIBLE Wisbi® PLUS

Mehr Flexibilität: Bettelinlage mit integrierter Ruftechnik

TEXIBLE Wisbi® PLUS – für stationäre Einrichtungen

Noch mehr Flexibilität genießen professionell Pflegende mit TEXIBLE Wisbi® PLUS. Es kann über den Sender PLUS mit Easywave Funkempfänger an die haus eigene Lichtrufanlage angeschlossen werden. Alternativ ist der Sender PLUS mit Easywave Steckdosen-Empfänger erhältlich – die ideale Lösung für Haushalte bzw. Reha- und Pflegeeinrichtungen, in denen kein WLAN zur Verfügung steht.



Wisbi® PLUS mit Easywave Funkempfänger zur Anbindung an Lichtrufanlagen

„TEXIBLE Wisbi® PLUS sorgt für ein gesteigertes Wohlbefinden unserer Heimbewohner. Sie werden nur nach Bedarf in ihrem Schlafrhythmus gestört. Auch unser Pflegepersonal wird dadurch entlastet.“


Andrea Winder,
Leiterin Pflegeheime der Stadt Dornbirn




Mehr Informationen:



www.bock.net/xcl6

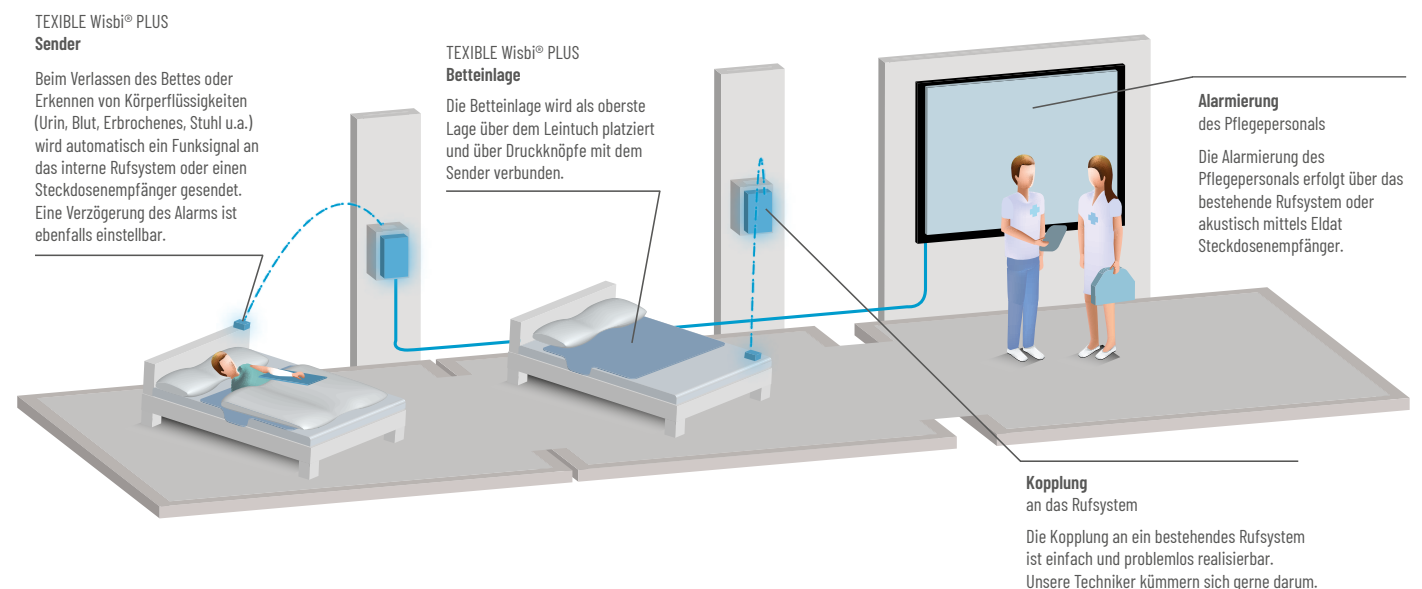

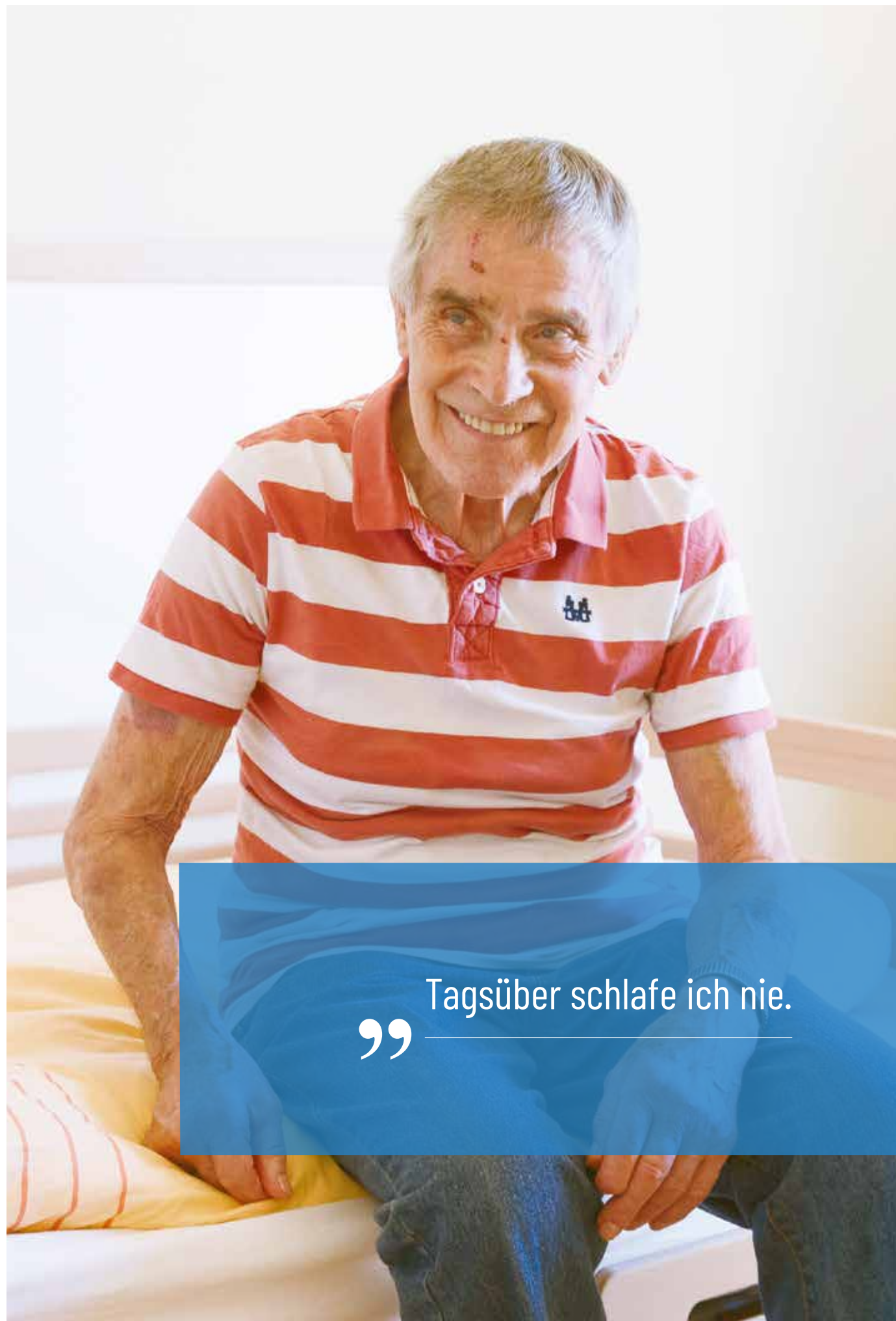

„Tagsüber schlafe ich nie.“

Helmut, 83 Jahre

„Ich liebe es, in der Natur zu sein und zeichne gerne etwas für meine Tochter. Außerdem liegen mir meine sozialen Kontakte sehr am Herzen. Gut schlafen bedeutet für mich weiter schlafen! Tagsüber schlafe ich nie – das habe ich auch früher nicht getan. Früh aufstehen und arbeiten: Das bin ich so gewohnt!“



Helmut ist weitgehend selbstständig und benötigt keine Unterstützung im Alltag. Für ihn ist ein Bett ideal, das seine Mobilität unterstützt, einfach verstellbar ist und komfortable Sitzpositionen bietet. Wegen seiner beginnenden Demenz ist später der Einsatz eines intelligenten Monitoringsystems mit Meldefunktionen sicherlich sinnvoll.

Helmuts Diagnose: Leichte Demenz vom Alzheimer-Typ, Hypertonie und ein leichter Schlaganfall ohne messbare Auswirkungen bei den AEDLs. (AEDL nach Krohwinkel = Aktivitäten und existenziellen Erfahrungen des Lebens)

stellar

Jederzeit pflegebereit: Das wandelbare Komfort-Polsterbett



Traumhaft schlummern und das Leben genießen: **stellar** ist ein **hochwertiges Komfort-Polsterbett**, das Schlafkomfort mit stilvoller Wohnlichkeit verbindet und mit vielen innovativen Ausstattungsdetails verwöhnt. So ist das stellar **serienmäßig** mit **kabelgebundenem Handschalter** und **beleuchtetem Funkhandschalter** ausgestattet, die die Anwahl individueller Sitz- oder Relaxpositionen ermöglichen.

Und auch Extras wie der **USB-Anschluss im Kopfteil** sowie die **integrierte Bettleuchte** erfüllen höchste Ansprüche an Komfort und Funktion.

stellar ist als Einzel- oder Doppelbett erhältlich und passt dank einer **großen Auswahl an Farben und Stoffen** zu jedem Einrichtungsstil.

Pflege? Vielleicht später: stellar lässt sich bei Bedarf **mit einem Aufrichter und kopfseitiger Seitensicherung nachrüsten** und damit zum Pflegebett erweitern. Praktisches Detail: Beim Doppelbett kann auch nur eine Bettseite entsprechend konfiguriert werden. Damit ist stellar prädestiniert für Wohnformen wie das betreute Wohnen oder Senioren-Residenzen, eignet sich jedoch ideal auch als Komfort-Polsterbett für den privaten Bereich.



Maria (54), Aschaffenburg

„Wir wollen Menschen, die sich für einen Platz in unserer Seniorenresidenz interessieren, mit höchster Qualität überzeugen. Das stellar ist hierfür genau das richtige Bett!“



Weitere Stoff- und Lederarten auf S. 63

stellar

stellar



Kompatibel mit TEXIBLE Wisbi® Seite 42


Maße			
Einzelbett			
Außenmaß		105 x 227 cm	
Liegefläche		90 x 200 cm	
Sondermaße	Breite	100, 120, 140 cm	
	Länge	220 cm	
Doppelbett			
Außenmaß		195 x 227 cm	
Liegefläche		180 x 200 cm	
Sondermaße Doppelbett	Breite	200 cm	
	Länge	220 cm	
Höhenverstellung		40 - 80 cm	
Lifterunterfahrbarkeit		möglich nach Entfernen der unteren Seitenblende	

Gewichte	
Einzelbett	
Bettgewicht	ca. 167 kg
Sichere Arbeitslast	220 kg
Max. Personengewicht	185 kg
Doppelbett	
Bettgewicht	ca. 304 kg
Sichere Arbeitslast	Pro Seite 220 kg
Max. Personengewicht	Pro Seite 185 kg

Weitere Ausstattungsmerkmale	
Liegeflächen	ripolux® neo in drei Härtegraden
Motor	Spritzwasserschutz nach IPX4, hochwertiges Spiralkabel mit Zugentlastung und Knickschutz, SMPS Steckertrafo mit Schutzkleinspannung und dadurch Sicherheit ab der Steckdose



Produktspezifikationen und Zubehör finden Sie ab Seite 56

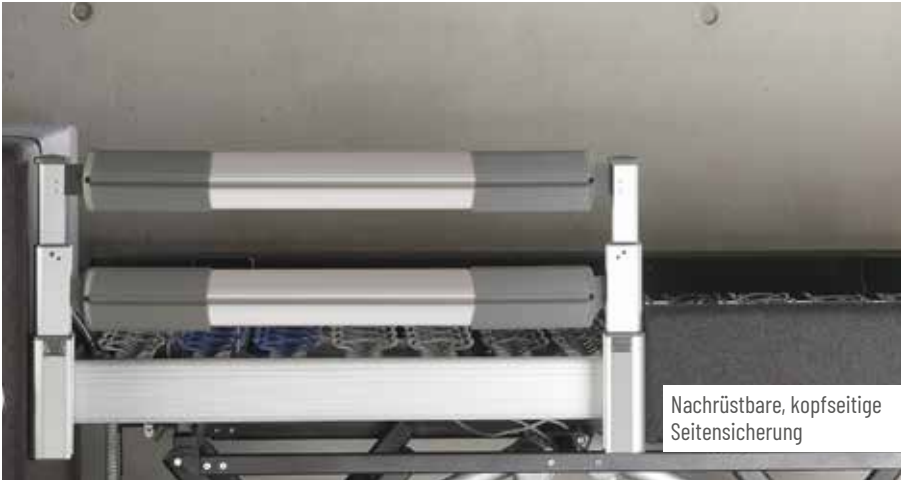

Nachrüstbare, kopfseitige Seitensicherung



Serienmäßig ripolux® neo in drei unterschiedlichen Härtegraden



Ambiente-Beleuchtung



Extra: USB-Anschluss und Steckdose



USB-Hub an Leseleuchte



Beleuchteter Funkhandschalter



Mehr Informationen:




www.bock.net/xj12

Die Produktvorteile des stellar:



Zur Wahl stehen verschiedene Breiten, Längen und Höhen

- + Wandelbar zum Pflegebett
- + Komfort-Sitzposition
- + Ergonomische Liegeflächen mit ripolux® neo in drei Härtegraden
- + Auch als Doppelbett erhältlich
- + Funk- und kabelgebundener Handschalter
- + Bett-Leseleuchte inklusive USB-Hub

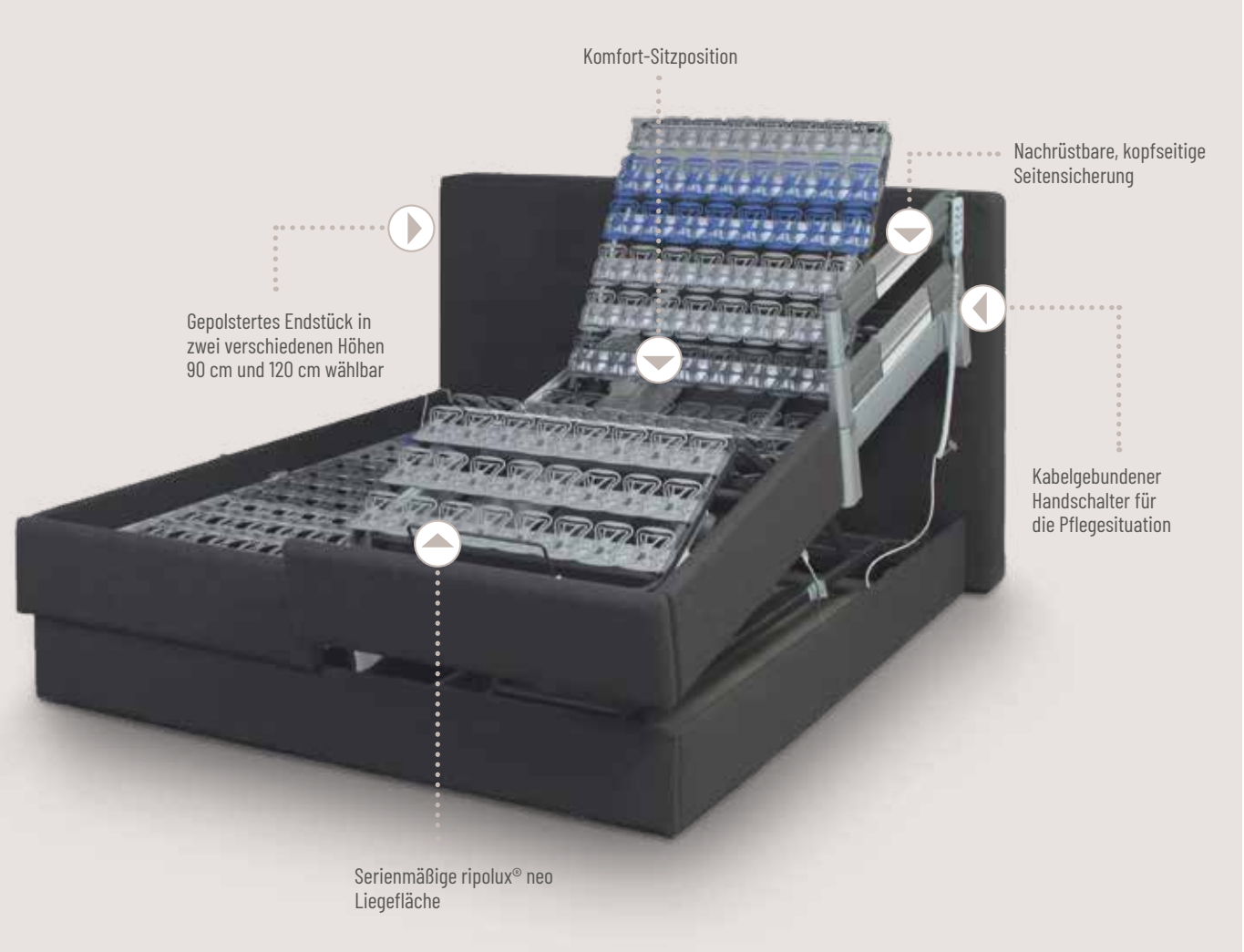

Komfort-Sitzposition

Nachrüstbare, kopfseitige Seitensicherung

Gepolstertes Endstück in zwei verschiedenen Höhen 90 cm und 120 cm wählbar

Kabelgebundener Handschalter für die Pflegesituation

Serienmäßige ripolux® neo Liegefläche



„ Gut schlafen bedeutet
für mich alles!

Adelheid, 81 Jahre

„Ich telefoniere gern mit meinen Kindern und beschäftige mich mit Vielerlei – ob Stricken, Malen, Denksport, Fitness oder klassische Musik hören. Früher bin ich gerne ins Theater und in Konzerte gegangen. Gut schlafen bedeutet für mich alles! Wenn ich schlecht schlafe, ist der ganze Tag nicht Fisch, nicht Fleisch ...“




Adelheid schläft nachts nur phasenweise. Daher wäre ein drahtloses Monitoringsystem in Form einer Betteinlage mit Meldefunktion für sie ideal, um nächtliche Störungen zu vermeiden. Aufgrund ihrer Parkinson-Erkrankung sollten die Bettfunktionen eine gute Haptik und einfache Bedienung bieten.

Adelheids Diagnose: Morbus Parkinson, begleitet von Aktionstremor, depressive Episoden, Hypertonie. Sie benötigt nur beim Duschen etwas Hilfe und bewältigt ansonsten den Alltag selbstständig.

combiflex fc

Flexibler Ruhepol für jede Lebenssituation

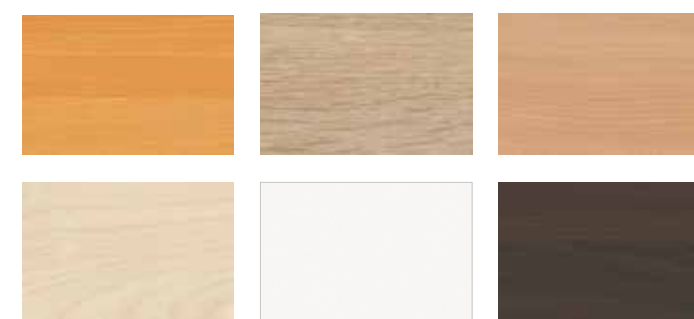

Details zu den Dekoren
auf Seite 63

Mit dem **combiflex fc** haben wir ein innovatives Komfortbett entwickelt, das seinem Namen alle Ehre macht: Unterschiedliche **Module** lassen sich **flexibel miteinander kombinieren** und ermöglichen die individuelle und bedarfsgerechte Konfiguration eines **Einzel- oder Doppelbetts**, dessen Vorteile auch Menschen ohne Pflegebedarf schätzen. So können Sie das combiflex fc wahlweise mit umlaufender Blende oder Fußendstück verwenden.

Der hochwertige Echtholz-Umbau unterstreicht den wohnlichen und individuellen Charakter des combiflex fc. Auch beim combiflex fc sind **Höhe, Rücken- und Beinlehne stufenlos verstellbar**, sodass beispielsweise eine bequeme **Komfort-Sitzposition** eingestellt werden kann. Bei Bedarf können Extras wie **Aufrichter und verschiedene Seitensicherungen** nachträglich hinzugefügt werden, sodass sich das combiflex fc auch für die Pflege eignet.



Anja (44), Kassel

„Mit dem combiflex fc kann man sich ein wohnliches Pflegebett ganz einfach selbst zusammenstellen – und das sogar als Doppelbett. Mehr Flexibilität geht nicht!“

combiflex
fc

combiflex
fc



Kompatibel mit TEXIBLE Wisbi® Seite 42

Maße		
Einzelbett		
Außenmaß	105 x 212 cm	
Liegefläche	90 x 200 cm	
Sondermaße	Breite	100, 120, 140 cm
	Länge	220 cm
Doppelbett		
Liegefläche	180 x 200 cm	
Sondermaße Doppelbett	Breite	200 cm
	Länge	220 cm
Höhenverstellung	38 - 81 cm	
Lifterunterfahrbarkeit	15 cm	

Gewichte	
Bettgewicht	113 kg
Sichere Arbeitslast	220 kg
Max. Personengewicht	185 kg

Seitensicherung	
Material	Holz
Unterteilung	durchgehend lang geteilt kopfseitig
Höhe*: - Mit Federholzleisten - Mit ripolux® neo	39,5 cm
	35 cm

Weitere Ausstattungsmerkmale	
Endstücke	Massivholz
Motor Spritzwasserschutz nach IPX4, hochwertiges Spiralkabel mit Zugentlastung und Knickschutz, SMPS Steckertrafo mit Schutzkleinspannung und dadurch Sicherheit ab der Steckdose	

*Abstand zwischen Oberkante Liegefläche und Oberkante
hochgezogene Seitensicherung



Produktspezifikationen und Zubehör finden
Sie ab Seite 56



Sperrschlüssel



Mobilisierende, kopfseitige Seitensicherung



Optional Alu-Standfüße



Handschalter








Die Produktvorteile des combiflex fc:



Designvariante ohne Fußendstück

- + Variables Baukastensystem
- + Pflegebedarfsgerechte Konfigurationsmöglichkeiten
- + Auch als Doppelbett erhältlich
- + Wahlweise mit Rollen oder Alu-Standfüßen
- + Verschiedene Seitensicherungsvarianten
- + Pflegezubehör jederzeit nachrüstbar
- + Mühelos bedienbar per Handschalter
- + Ergonomische Liegefläche

Seitensicherungen – Modelle

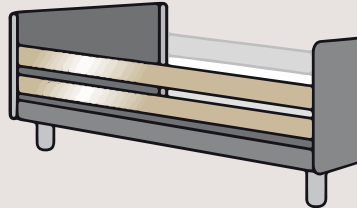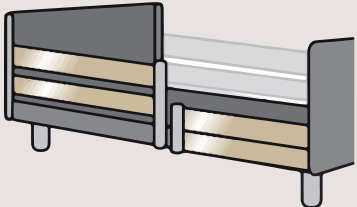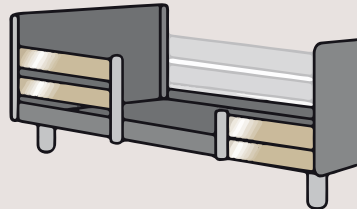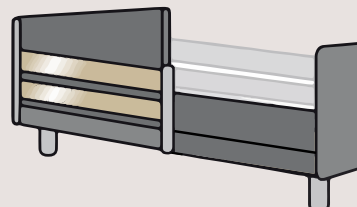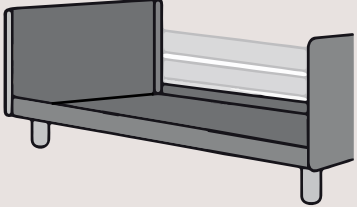	SEITENSICHERUNG, WERKZEUGLOS VERLÄNGERBAR	SEITENSICHERUNG	SEITENSICHERUNGS-VARIANTEN	
				
DURCHGEHEND	practico alu plus practico alu 25 80 floorline 9.5 80	livorno niedrig practico 25 80 combiflex fc adilec 280		- Der Klassiker, einfach, sicher und ökonomisch - Für notwendige Mobilisationsunterstützung sollten zusätzliche Hilfen benutzt werden.
LANG GETEILT	practico alu plus practico alu 25 80 floorline 9.5 80	livorno niedrig practico 25 80 combiflex fc		- Mobilisierungsunterstützung möglich durch fußseitig heruntergelassene Seitensicherung - Hohe Flexibilität in der Anwendung
KURZ GETEILT	practico alu plus practico alu 25 80	livorno niedrig practico 25 80		- Mittellücke gut zur Mobilisation geeignet - Beidseitige Abstützmöglichkeit - Einfach und sicher verlängerbar bei integrierter, werkzeugloser Bettverlängerung
KOPFSEITIG (51 %-LÖSUNG)	practico alu plus practico alu 25 80 floorline 9.5 80 stellar	livorno niedrig practico 25 80 combiflex fc		- Kopfseitige Lösung mit viel Freiraum beim Aufstehen - Mobilisierungsunterstützung möglich - Besonders viel Sicherheit bei möglichst wenig Einschränkung - Bei der integrierten, werkzeuglosen Bett- und Seitensicherungsverlängerung bleibt die kopfseitige Lösung beim Ausziehen auf 210 cm und 220 cm erhalten.
OHNE	practico alu plus practico alu 25 80 floorline 9.5 80 stellar	livorno niedrig practico 25 80 combiflex fc		- Maximale Bodennähe beim floorline 9.5 80 - Vorrangig für (noch) nicht eingeschränkte Bewohner geeignet

Integrierte, werkzeuglose Bettverlängerung: Einfach mehr Komfort und Sicherheit

Viele unserer Komfort- und Pflegebetten sind mit einer integrierten, werkzeuglosen Bettverlängerung um bis zu 20 cm ausgestattet, teilweise in Kombination mit Seitensicherungsvarianten, die einfach „mitwachsen“ – und das sowohl kopf- als auch fußseitig.

Ein intelligentes System, das durch sein einfaches Handling Pflegende entlastet und sowohl wirtschaftlich als auch pflegerisch klare Vorteile hat:

- Pflegende können schnell und mit wenigen Handgriffen die Bettlänge an unterschiedliche Bewohnerprofile und Pflegesituationen anpassen. Ein aufwendiger Austausch von Bett und/oder Seitensicherung wird dadurch überflüssig.

- Die Liegefläche bleibt vollumfänglich in ihrer Funktionalität erhalten, da sich das zusätzliche Fußteil bei Verstellung der Liegefläche entsprechend mitgeführt wird. Damit bietet das Bett auch mit Verlängerung höchsten Komfort in allen Positionen.
- Der Einsatz zur Matratzenverlängerung kann bei entsprechender Indikation einfach weggelassen werden: Dies ermöglicht eine Druckentlastung der Fersen und damit eine effektive Dekubitus-Prophylaxe in diesem Bereich.



Einsatz Bettverlängerung

nur für practico alu plus, practico alu 25|80, floorline 9.5|80
Art.-Nr. 402



Matratzenverlängerung

Art.-Nr. auf Anfrage

Zubehör Seitensicherungen



für livorno niedrig, practico 25|80 und adilec 280

kurz geteilt 200 cm Betten Art.-Nr. 90950 A003	lang geteilt 200 cm Betten Art.-Nr. 90950 A004 (kopfseitig) + A005 (fußseitig)	durchgehend 200 cm Betten Art.-Nr. 90950 A002	durchgehend 220 cm Betten Art.-Nr. 90950 A009
--	---	---	---

Erhöhung

für practico alu plus, practico alu 25|80 und floorline 9.5|80
– integrierte, werkzeuglose Verlängerung auf 220 cm –

kurz geteilt 200-220 cm Betten Art.-Nr. 91904 A005	lang geteilt 200-220 cm Betten Art.-Nr. 91904 A003 (kopfseitig) + A004 (fußseitig)	durchgehend 200-220 cm Betten Art.-Nr. 91904 A001
--	---	---



kurz geteilt Farbe Beige Art.-Nr. 207.00288	lang geteilt Farbe Beige Art.-Nr. 207.00287 + 207.00286
---	---



durchgehend Farbe Beige Art.-Nr. 890.01581	durchgehend inkl. Erhöhung Farbe Beige Art.-Nr. 207.00316
--	---

Polster



Netz
Farbe Blau
Art.-Nr. 890.01806


Zubehör

Unser vielfältiges Zubehörsortiment für eine individuelle und situationsgerechte Bettausstattung.

Aufrichter



Aufrichter Handgriff
Art.-Nr. 92228 A001

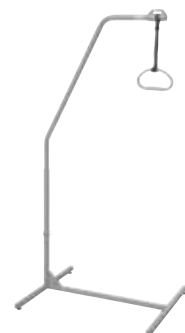

Standaufrichter
Art.-Nr. 91512 A001



Aufstehhilfe
Art.-Nr. auf Anfrage

Infusionshalter



Infusionshalter (fix)
Art.-Nr. 890.02301



Infusionshalter höhenverstellbar
Art.-Nr. 890.02302



Infusionshalter für Aufrichter
Art.-Nr. 890.02300

Universalhalter



Universalklemme
Drainagesackhalter
Art.-Nr. 890.02299



Universalklemme
Urinflaschenhalter
Art.-Nr. 890.02298

Leuchten



LED-Bettleuchte Modell F
Bedienung über Handschalter
Nur anwendbar mit
limoss-Kastenmotor
Art.-Nr. auf Anfrage



LED-Bettleuchte Modell G
Nur anwendbar mit
Dewert-Einzelantrieben
Art.-Nr. 100.04164



LED-Bettleuchte Modell E
mit externem Steckernetzteil
und Kippschalter
Art.-Nr. 207.00196



Unterbettleuchte
UB mit Bewegungsmelder (limoss)
UF mit Stecker (Dewert)
Art.-Nr. auf Anfrage

Abstandhalter



Wandabweisrolle
Art.-Nr. auf Anfrage



Wandabstandshalter mit Rolle
Art.-Nr. auf Anfrage



Wandabstandshalter mit Stopfen
Art.-Nr. auf Anfrage

Sonstiges



Abrollmatte für Niedrigbetten
Art.-Nr. 207.00245



Transportwagen
Art.-Nr. 100.04161



Schwesterpanel
Art.-Nr. auf Anfrage

Endstücke

für livorno niedrig, practico 25|80



- Typ I**
- Umlaufende Massivholzstollen mit Dekorfüllung
 - praktischer Bettdeckenschlitz



- Typ VIII**
- Gerade Dekorplatte: Holz
 - Seitlich angesetzte Rundstollen, Massivholz



- Typ V**
- Geschwungene Dekorplatte: Massivholz
 - Seitl. Rechteckstollen: Massivholz
 - Geschwungener Griffbügel: Stahl pulverbeschichtet



- Typ VII**
- Umlaufende Massivholzstollen mit Dekorfüllung
 - Gewölbte Grifföffnung: Bettdeckenschlitz
 - Verjüngende Stollenumrandung

für practico alu plus, practico alu 25|80



- Typ 20**
- Umlaufende Massivholzstollen mit Dekorfüllung
 - praktischer Bettdeckenschlitz



- Typ 21**
- Geschwungene Dekorfüllung
 - Abgerundete Aluminiumprofile
 - Metall-Handlauf nur für Standard-Breite 90 cm



- Typ 22**
- Geschwungene Dekorfüllung
 - Abgerundete Aluminiumprofil

für floorline 9.5|80



- Typ 31**
- Geschwungene Dekorfüllung
 - Abgerundete Aluminiumprofile
 - Metall-Handlauf



- Typ 32**
- Geschwungene Dekorfüllung
 - Abgerundete Aluminiumprofile

Dekore & Stoffe

Die Vielfalt unserer Programme und Stile macht Objekteinrichtungen von bock unvergleichlich flexibel. Als erfahrener Hersteller bieten wir Ihnen vom Objektbett bis zur maßgenauen Sonderanfertigung eine qualitativ hochwertige Möblierung, die Funktionalität mit Komfort verbindet. Alles kann nachträglich auf- und um-

gerüstet werden. Alle Fronten und Farben sind austauschbar. Die Elemente können entsprechend angepasst werden. bock Möbel können Sie außerdem mit Zusatzfunktionen und optionalem Zubehör ausstatten. So bleiben Sie auch nach der Einrichtung flexibel und für alle künftigen Veränderungen offen.

Basis-Dekor	Holz-Dekore			Sonder-Dekor
Buche gedämpft (Basis)	Kirsche Havanna	Madison Walnut	Ahorn After Eight	Weiß
	Königsahorn	Sonoma Eiche	Weißbuche	

stellar – Bezugssortiment

Sie können aus einem breiten Spektrum an Stoff- & Kunstlederqualitäten und Farben wählen.

Stoffe			Kunstleder		
Tiba 7110 Anthrazit	Tiba 5111 Dunkelblau	Tiba 4110 Beere	Silkgray F6470003	Birch F6470004	Choco F6470009
Tiba 1110 Beige	Tiba 1111 Taupe	Tiba 2211 Gelb	Platinum F6470010	Anthrazite F6470011	Royal F6470018
Tiba 3210 Rot	Tiba 6210 Grün		Cherry F6470016	Lime F6470013	

Matratzen



Basis-Matratze RG 35 bis 75 kg

- PU-Schaumstoffmatratze, ca. 10 cm hoch
- 1-seitiger Reißverschluss (eine kurze Seite und 20 cm über Eck)

Bezug:

- Single Jersey (hellblau), 90 g/qm, 100 % Polyester
- Wahlweise mit PU-Spannbezug als Näscheschutz
- Alternativ mit PU-Vollbezug als Näscheschutz



Schwerlast-Matratze XXL bis 200 kg

- Form-Schaummatratze, 20 cm hoch
- Zwei Außenkerne aus Kaltschaum und ein hochbelastbarer, 12 cm hoher Spezial-Form-Schaum
- 4-seitiger Reißverschluss

Bezug:

- Hochwertiger Doppeltuchbezug mit Klimafaser versteppt
- Waschbar bis 60° C



Basis-Matratze RG 40 bis 80 kg

- PU-Schaumstoffmatratze, ca. 12 cm hoch
- 2-seitiger Reißverschluss (eine kurze Seite und eine lange Seite)

Bezug:

- Elastische Strickware, 180 g/qm, 58 % Polyester, 42 % Baumwolle
- Wahlweise mit PU-Spannbezug als Näscheschutz
- Alternativ mit PU-Vollbezug als Näscheschutz
- Waschbar bis 95° C, 105° C autoklavierbar



Schwerlast-Matratze mit Gelaufte bis 300 kg

- Polyurethan-Schaumstoff RG 50, ca. 12 cm hoch
- Hoher Liegekomfort durch Sandwichkonstruktion
- 2-seitiger Reißverschluss

Bezug:

- Hochwertiger PU-Vollbezug blau
- Waschbar bis 95° C, trocknergeeignet bis 50° C


riposan-Matratze RG 55 bis 100 kg

- 7-Zonen-Kaltschaummatratze, ca. 14 cm hoch
- Durch den offenzelligen Spezialschaum ist eine hohe Punktelastizität und eine gute Druckverteilung gewährleistet
- Symmetrisch gestaltete Würfeloberfläche, die entsprechend den Körperzonen untergliedert und druck-entlastend strukturiert ist
- 2-seitiger Reißverschluss

Bezug:

- Doppeltuchgestrick, 3-lagig, 280 g/qm, 100 % PES, waschbar bis 95° C

ripolux® neo

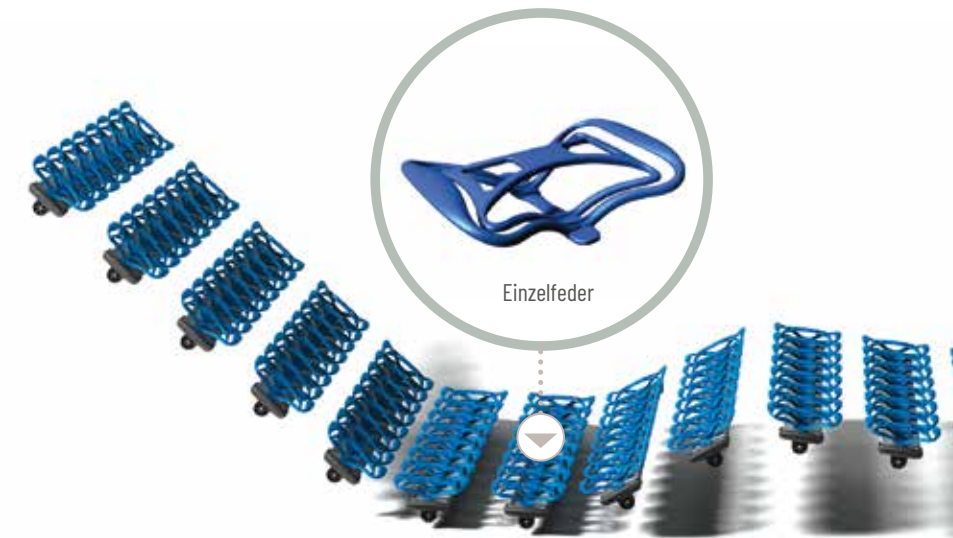

Ein Unterfederungs-System, perfekt für alle

Das flexible Unterfederungssystem passt sich genau der Druckverteilung des Körpers an. Für große genauso wie für kleine, schwere und leichte, für gehandicapte und gesunde Menschen. ricolux® neo sorgt für bequeme, ergonomische Lagerung im Pflegebett – in allen Sitz- und Liegepositionen, für alle Krankheitsbilder. Wenn Sinne und Körper durch Krankheit oder Lähmung beeinträchtigt sind, hilft ricolux® neo: mit punktueller Druckentlastung und zugleich gezielter Rücken- und Rumpfunterstützung.

Mit ricolux® neo können Pflegekräfte Rücken und Co. im Handumdrehen entlasten – um zugleich andere Körperregionen punktuell zu stützen. ricolux® neo folgt individuell feinjustiert dem Komfortbedürfnis der Bewohner und erzeugt ein maximales Wohlfühl. Verspannungen, Unruhe und Nachtaktivität können reduziert werden.

Liegefläche in drei Härtegraden



- + Lange Lebensdauer durch Hochleistungs-Kunststoff
- + Federn in drei verschiedenen Härtegraden
- + Werkzeuglose und individuelle Liegeflächen-Konfiguration
- + Druckausgleich dank unabhängiger Federwege
- + Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- + Maximale Hygiene und ideale Unterlüftung – kein Schimmel
- + Matratze fädelt nicht ein, verklemt und verkantet nicht, wirft keine Falten



Mehr Informationen zum Thema:

ripolux® neo



<https://bock.net/xz12>

Nachttische und Server



Folgende Dekore stehen zur Wahl



Buche gedämpft



Sonoma Eiche



Weißbuche



Königsahorn




Kirsche Havanna




Madison Walnut



Ahorn After Eight

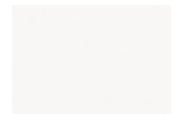


Weiß

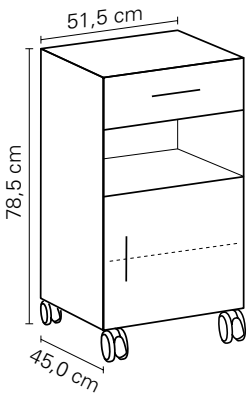


Standard 1300

- 1300: Mit Schublade und Tür

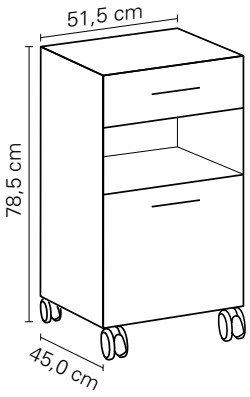


Standard 1301

- 1301: Mit Schublade und Auszug

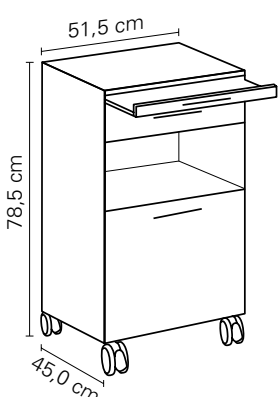


Standard 1302

- Mit Schublade und Auszug
- Tablar

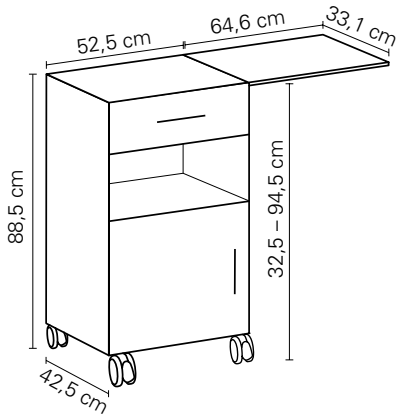


domiflex

- Nur in Havanna- und Buche-Dekor
- Mit Schublade und Tür
- Ausklappbares, höhenverstellbares Tablett
- Tablett rechts und links montierbar

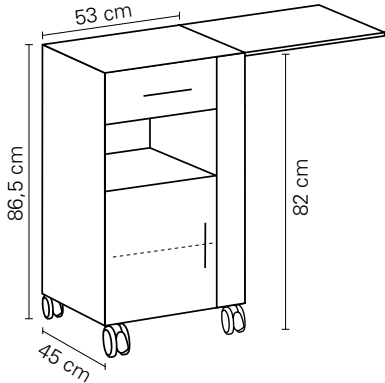


perfekta

- Integriertes, ausklappbares Tablett
- Beidseitig ausziehbare Schublade
- Offenes Fach
- Beidseitig bedienbare Drehtüren mit einem Einlegeboden
- Tablettstütze, wahlweise als Handtuchhalter

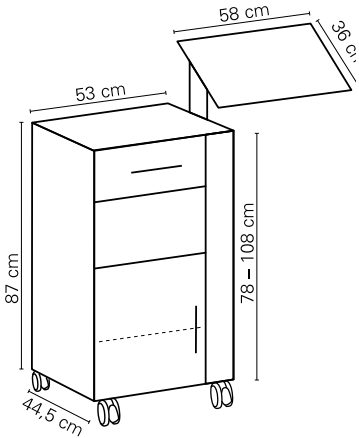


verona 310

- Integriertes, schräg stellbares, höhenverstellbares Tablett
- Beidseitig ausziehbare Schublade
- Offenes Fach
- Beidseitig bedienbare Drehtüren mit einem Einlegeboden

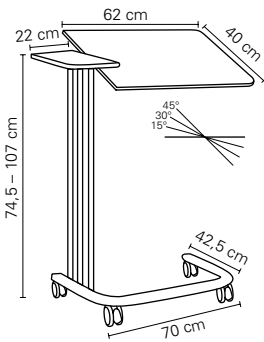


server 300

- Stufenlos höhenverstellbar
- Ablageplatte
- Schwenkbare Bettischplatte mit Stoppleisten

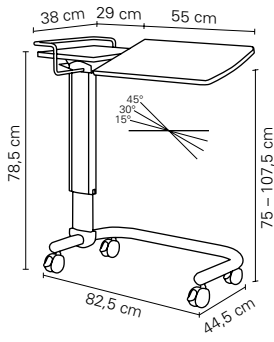

aluna server 351

- Ablageflächen und Profileinschub in Bettendekor
- Mit feststehendem Tablett und Hubhilfe
- Mit fester Ablage und schwenkbarer Kompaktplatte inkl. Stoppleisten
- Tablett mit Automatik-Auslöser

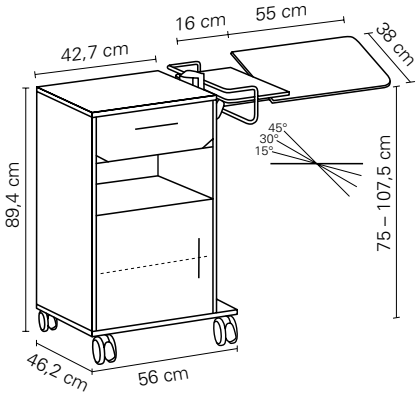

aluna 330 mit Server & Tür

- Beidseitig bedienbar, mit Auszugsschutz
- Offenes Fach
- Fach mit beidseitiger Tür und 1/2 verschiebbarer Ablageboden
- Seitlich angesetztes Tablett mit fester Ablage und schwenkbarer Platte
- Tablett mit Automatik-Auslöser
- Mit Multifunktionsbügel



„ In meinem Spezialbett schlafe
ich gut und nachts durch.“

Helga, 70 Jahre

Der kleine Hund der Einrichtung zählt zu Helgas Lieblingen. Er sitzt häufig auf ihrem Schoß, und die Beschäftigung mit ihm macht Helga Spaß. Sie lässt sich gerne vorlesen, schaut oft TV und hört gern Radio. Besonders mag sie italienische Schlager, die sie an ihre Urlaube erinnern. In einem Spezialstuhl verbringt sie gemeinsam mit anderen Bewohnern einige Stunden am Tag im Aufenthaltsbereich.



Aufgrund ihrer Beeinträchtigungen ist Helga bettlägerig und auf fremde Hilfe im Alltag angewiesen. Sie braucht ein Spezialbett, das mit Lagerungskissen ausgestattet ist. Mitteilen kann sie sich nur teilweise über Gestik und Mimik. Ein umfassendes, intelligentes Monitoring mit Meldefunktionen wäre daher für Helga eine ideale Lösung. Gemessen an ihrer Krankheit schläft sie gut und nachts auch durch.

Helgas Diagnosen: Hemiparese rechts (halbseitige Lähmung von Arm und Bein) aufgrund eines Schlaganfalls vor drei Jahren. Krampfanfälle, Aphasie und Post-Stroke-Depressionen. Hinzu kommt eine Hypertonie.

Unsere Produkte in der Übersicht

Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der von uns angebotenen Komfort- und Pflegebetten für die Objekteinrichtung mit allen verfügbaren Ausstattungsoptionen. Gerne beraten wir Sie auch persönlich rund um die Auswahl und Konfiguration unserer Betten!

● Serienausstattung

○ optionale Zusatzausstattung, ggf. Mehrkosten

— nicht möglich

practico alu plus

practico alu 25180

practico 25180

livorno niedrig

floorline 9.5180

adilec 280

stellar

combitflex fc

Artikel-Nummer	423	420	225	220	422	245	440/ 441	295
Bewohnerkomfort								
ripolux® neo	○	○	○	○	○	—	●	○
Federholzleisten mit Zonenverstärkung	●	●	●	●	●	Holz-Liege-fläche	—	●
Aluminium-Liegefläche clipbar	○	○	○	○	○	—	○	○
Kopf- und Beintiefelagerung	●	●	●	—	●	—	nur Bein	●
Komfort-Sitzposition	●	●	●	—	●	—	●	●
Bewohnersicherheit								
SMPS mit Schutzkleinspannung	●	●	●	●	● ab 07.2019	—	●	●
Seitensicherung durchgehend	○	○	○	○	○	●	—	○
Seitensicherung kopfseitig	○	○	○	○	○	—	○	○
Seitensicherungsvarianten wählbar	○	○	○	○	○	—	○	○
Matratzenausgleich	●	●	●	●	●	—	●	●
Rückenbügel	860 mm	775 mm	775 mm	775 mm	860 mm	660 mm	860 mm	775 mm
Handschalter mit Sperrfunktion zum Sperren von Bedienungsfunktionen	●	●	●	●	●	●	●	●
Zentralverriegelung	zentral blockier-bar	zentral blockier-bar	zentral blockier-bar	zentral blockier-bar	einzel blockier-bar	kopf- und fußseitig	einzel blockier-bar	einzel blockier-bar
Doppellauf-Rollen offen	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	125 mm	100 mm	100 mm
Alu-Standfüße	—	—	—	—	—	—	—	○
Rollenverkleidung	○	○	○	○	—	—	—	—
Handschalter Auto-Stopp-Funktion	3 Stopp	3 Stopp	3 Stopp	2 Stopp	5 Stopp	2 Stopp	3 Stopp	3 Stopp
Unterbettbeleuchtung	Hand-schalter	Bewe-gungs-melder	Bewe-gungs-melder	Bewe-gungs-melder	Hand-schalter	Bewe-gungs-melder	Hand-schalter	Hand-schalter

● Serienausstattung

○ optionale Zusatzausstattung, ggf. Mehrkosten

— nicht möglich

practico alu plus

practico alu 25180

practico 25180

livorno niedrig

floorline 9.5180

adilec 280

stellar

combitflex fc

Artikel-Nummer	423	420	225	220	422	245	440/ 441	295
Pflegeprozessoptimierung								
Handlauf am Kopf- und Fußteil	○	○	○	○	○	—	—	—
TEXIBLE Wisbi® HOME und PLUS	○	○	○	○	○	○	○	○
Niedrig(st)bett Einstiegshöhe	25 cm	25 cm	25 cm	29 cm	9,5 cm	40 cm	40 cm	38 cm
Integrierte, werkzeuglose Bettverlängerung bis 220 cm inkl. Seitensicherungsverlängerung	●	●	—	—	●	—	—	—
Einsatz Bettverlängerung	○	○	—	—	○	—	—	○
Bettverlängerungs-Set	—	—	○	○	—	—	—	—
CPR-Notabsenkung	●	—	—	—	—	—	—	—
Wartungsfreundlichkeit								
Kastenmotor	—	●	●	●	—	●	—	●
Einzelantrieb	●	—	—	—	●	—	●	—
Lifterunterfahrbarkeit	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	> 15 cm	> 15 cm	eingeschränkt möglich	15 cm
Spritzwasserschutz IPX 4	●	●	●	●	●	●	●	●
Ambiente & Design								
Unterbettbeleuchtung	○	○	○	○	●	—	—	○
Ambiente-Beleuchtung	—	—	—	—	—	—	○	—
Holzdekor Buche (Standard)	●	●	●	●	●	●	—	● (Massivholz)
Seitenblende für Liegefläche Holzdekor-/Polsterbezugfarbe	—	—	●	●	—	●	●	●
Technische Daten								
Liegeflächenbreiten in cm Einzelbett Doppelbett	90, 100, 110 —	90, 100, 110 —	90, 100, 110 —	90, 100, 110 —	90 —	100, 120, 140 —	90, 100, 120, 140, 180, 200	90, 100, 120, 140, 180, 200
Liegeflächenlänge in cm	200, 210, 220	200, 210, 220	200, 210, 220	190, 200, 210, 220	200, 210, 220	200, 220	200, 220	200, 220
Höhenverstellung in cm (von bis)	25 - 80	25 - 80	25 - 80	29 - 73	9,5 - 80	40 - 80	40 - 80	38 - 81
Bettgewicht in kg	135	160	147	109	165	210	167	113
Sichere Arbeitslast in kg	220	220	220	200	220	315	220	220
Max. Personengewicht in kg	185	185	185	165	185	280	185	185

Komfort- und Pflegebetten von bock: Sicherheit und Qualität auf höchstem Niveau

Moderne Medizinprodukte, eine Herausforderung

Medizinprodukte wie die Komfort- und Pflegebetten von bock, sicher und mit dem besten Nutzen für Patienten, Bewohner und professionelle Pflegende, aber auch für unbeteiligte Dritte anzuwenden, ist Zielsetzung des europäischen Medizinprodukterechts. Die neue EU-Medizinprodukteverordnung 2017/745 (Medical Device Regulation, MDR) befindet sich derzeit in der Einführungsphase und wird am 26. Mai 2020 im gesamten europäischen Wirtschaftsraum zu geltendem Recht.

Die MDR stellt hohe Anforderungen an die Entwicklung und Produktion sowie den Vertrieb von Medizinprodukten: Der Geltungsbereich des Medizinprodukterechts wird erweitert, gleichzeitig gelten strenge Auflagen für die Sicherheit und den Nachweis des medizinischen Nutzens. Moderne Produkte mit neuartigen Technologien und Materialien verändern den Versorgungsalltag immer schneller. Man denke nur an die Digitalisierung der Pflege. Durch eine zunehmende Internationalisierung des Marktes bekommt zudem die Identifikation, Rückverfolgbarkeit und Überwachung von Produkten rechtlich einen immer größeren Stellenwert.

Eine komplexe Aufgabe, der wir uns als international tätiges, innovatives Unternehmen gerne stellen. Denn neue, hochwertige und sichere Komfort- und Pflegebetten sind auch vor dem Hintergrund des demographischen Wandels ein wichtiger Bestandteil der Versorgung alter, kranker und behinderter Menschen.

Verantwortung wahrnehmen

Doch die MDR stellt nicht nur hohe Anforderungen an die Hersteller von Medizinprodukten, sondern auch an Händler, Betreiber und Anwender. Denn auch für die Anwendung und Instandhaltung bzw. Wartung hat der Gesetzgeber umfassende Vorschriften erlassen.

So müssen Händler sich vor der Auslieferung über die Qualität und Sicherheit der vertriebenen Produkte vergewissern und den Reha- und Pflegeeinrichtungen alle Informationen für einen sicheren Betrieb zur Verfügung stellen. Gemeinsam mit dem Hersteller haben sie zudem die Aufgabe, die Produkte im Markt kontinuierlich zu beobachten und den Versorgungsprozess anzupassen – Gründe genug, warum bock nur mit qualifizierten und geschulten Fachhändlern zusammenarbeitet.

MDR-Konformität

Die Produktionsfreigabe erfolgt, wenn sichergestellt ist, dass verbleibende Restrisiken minimal sind, also eine risikofreie Anwendung gewährleistet ist. Komfort- und Pflegebetten von bock sind gemäß MDR, Anhang VIII, als aktive Medizinprodukte der Klasse I (niedrigste Risikoeinstufung) einzuordnen. Die Konformität mit Vorgaben der EU-Medizinprodukteverordnung wird durch ein Konformitätsbewertungsverfahren gesichert.

Unser Qualitätsmanagement

Mit unserem Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485 stellen wir die Optimierung von Arbeitsabläufen sicher und sorgen dafür, dass unsere Produkte allen gültigen Normen entsprechen und die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Außerdem wird jedes Komfort- und Pflegebett nach der Herstellung einer umfassenden Funktionsprüfung am Produktionsstandort unterzogen. Bei jeder Erstbelieferung erfolgt eine Einweisung in die sachgerechte Handhabung des Produkts. Zudem bieten wir Schulungen für den richtigen und sicheren Gebrauch elektrischer Pflegebetten an.

Gemeinsam für höchste Sicherheit

Hersteller, Betreiber und Anwender bilden bei der Einhaltung und Durchführung der Sicherheitsbestimmungen und Schutzmaßnahmen ein Team mit klar geregelten Verantwortlichkeiten.

- Betreiber eines Medizinproduktes ist jede natürliche oder juristische Person, die für den Betrieb einer Gesundheitseinrichtung verantwortlich ist, in der Komfort- und Pflegebetten von bock verwendet werden. Als Betreiber gilt auch, wer außerhalb von Gesundheitseinrichtungen Medizinprodukte zur Anwendung bereithält, z. B. Sanitätshäuser und Fachhändler, die Komfort- und Pflegebetten verleihen. Ebenso müssen Krankenkassen die Betreiberpflichten für die Betten übernehmen, die sie den Versicherten zur Verfügung stellen. Betreiber und Krankenkassen sind unter anderem verantwortlich für die Einweisung des Anwenders in Gebrauch und Wartung.
- Anwender ist, wer ein Komfort- und Pflegebett von bock professionell in der Pflege einsetzt. Die Verantwortung für die sichere und fachgerechte Nutzung des Bettes ist dabei unabhängig von Hierarchien in der Gesundheitseinrichtung, sodass der Anwender die gesetzlichen Verpflichtungen eigenverantwortlich zu erfüllen hat.

Service und regelmäßige Inspektionen

Medizinprodukte müssen entsprechend den Herstellervorgaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik regelmäßig inspiziert werden, um Verschleiß und damit verbundenen Gefahren sicher vorzubeugen. Der Hersteller hat dabei keinen Einfluss darauf, inwieweit die vorgeschriebenen Regeln vom Betreiber eingehalten werden. So müssen die individuellen Fristen jeweils vom Betreiber festgelegt und begründet werden. Doch die Gefahrvermeidungspflichten gehen darüber hinaus und bestehen aus Organisations-, Aufklärungs-, Behandlungs- und Kooperationspflichten. Aufgaben, die durch den vom Betreiber zu benennenden „Beauftragten für Medizinproduktesicherheit“ übernommen werden können. Aber auch bock als Hersteller vereinfacht Ihnen die Einhaltung der notwendigen Schutzvorkehrungen mit zeitsparenden Serviceleistungen.



Notizen

Notizen

www.bock.net



Hermann Bock GmbH
Nickelstraße 12
D-33415 Verl

Telefon +49 5246 9205 0
Telefax +49 5246 9205 25
E-Mail info@bock.net

.bock[®] 

©eingetragenes Warenzeichen
Stand: 09 | 2021
Bestell-Nr.: 890.01952
Technische Änderungen vorbehalten